


## INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ DE UTILIZARE

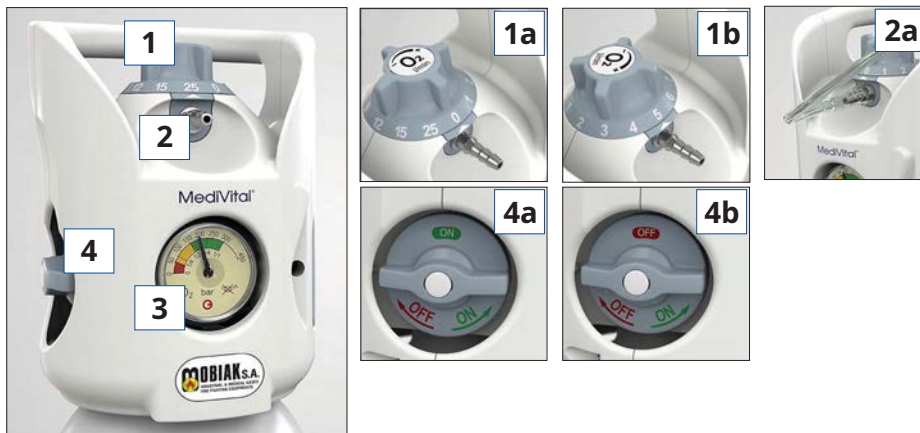

### ÎNAINTE DE UTILIZARE

Vă rugăm să verificați supapa de reglare pentru orice semne de deteriorare sau contaminare. De asemenea, verificați cantitatea de gaz din citirea manometrului (3) cilindrilor. Presiunea gazului (cantitatea de gaz) este dată de citirea manometrului nu trebuie atunci când supapa cilindrilor (4) ON/OFF este în poziția ON.

### Funcțiile supapei de control:

- Asigurați-vă că supapa de control al debitului (1) este în poziția 0.
- Deschideți supapa de închidere (4a) rotindu-l încet până când ON este complet afișat ca în fereastră (4a).
- Verificați scurgerile ascultând dispozitivul.
- Rotiți comutatorul de control al debitului (1) la dreapta în poziție (1) și verificați dacă gazul curge prin orificiu de evacuare (2). Continuați să rotiți butonul de control al debitului (1) pentru a verifica debitul de gaz în fiecare dintre ele setări.
- Închideți robinetul de control al debitului (1), readucându-l în poziția 0.

### UTILIZAREA SUPAPEI/O SETARE

- Asigurați-vă că comutatorul de control al debitului (1) este setat la 0.
- Conectați accesoriile (canula sau mască) la ieșirea de curgere (2a).
- Deschideți supapa de oprire (4) rotindu-se încet până când este complet așa cum se arată până în poziția în care afișat în fereastră (4a).
- Setați butonul de control al debitului în poziția dorită. Asigurați-vă că butonul de control al debitului este aliniat corespunzător ca (1b).



**Înainte de a conecta fiecare componentă la fluxul de ieșire, asigurați-vă că pacientul nu este conectat la dispozitiv.**

**Deschideți încet supapa de oprire!**

**Asigurați-vă întotdeauna că butonul de control al debitului este setat corect și nu este plasat între setări.**

**Nu aplicați forță excesivă butonului de control al debitului! Debitul indicat se bazează pe instrucțiunile medicului.**

### DUPĂ UTILIZARE

- Închideți robinetul ON/OFF prin rotire în sensul acelor de ceasornic până când se atinge o rezistență constantă la rotație.
- Dacă există dispozitive medicale conectate la priză, acesta ar trebui să fie aerisit presiune.
- Deconectați orice dispozitiv medical de la priza de curent.
- Setați butonul de control al debitului pe 0.

Informații: MOVIK S.A. Kathiana- Akrotiriou 96-98, Chania, Creta.

## INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ DE UTILIZARE

### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ






**Păstrați produsul și materialele aferente ALE DE:**

- Surse de căldură (foc, țigări, țigărete electronice...)
- Materiale inflamabile.
- Toate uleiurile și grăsimile: nu folosim niciodată creme sau loțiuni pentru mâini atunci când folosim sau manipulăm echipamente.
- Apă.
- Pudra.

Preveniți căderea cilindrului și a echipamentului său sau orice fel de impact.

Mențineți întotdeauna standardele de curățenie în oxigen.

Utilizați produsul și echipamentele aferente acestuia numai într-o zonă bine ventilată.

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE	
	- 20* / +65 °C
	10 / 100 %
	600 / 1200 mbari

Nu utilizați supapa de reglare la temperaturi sub -20 °C.

Înainte de a conecta orice accesoriu sau dispozitiv medical la supapa de reglare, verificați întotdeauna dacă sunt pe deplin compatibile cu caracteristicile de conectare și de performanță ale produsului.

Dacă supapa de reglare este deteriorată sau contaminată, nu o utilizați și contactați imediat furnizorul.

Se recomandă imbutelierea în imbuteliatorii certificați - omologați de EOF unde au adaptorul special cod 0810542.

Garantie 2 ani.

În cazul deteriorării cauzate de echipamente neautorizate, dispozitivul este automat exclus din garanție.

Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați Departamentul nostru de Servicii Clienți.


Telefon: +30 2821063222

E-mail: [mobiakcaresales@mobiak.com](mailto:mobiakcaresales@mobiak.com)

Vizitați site-ul nostru [www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)

# MediVital®

## GHID RAPID DE REFERINȚĂ

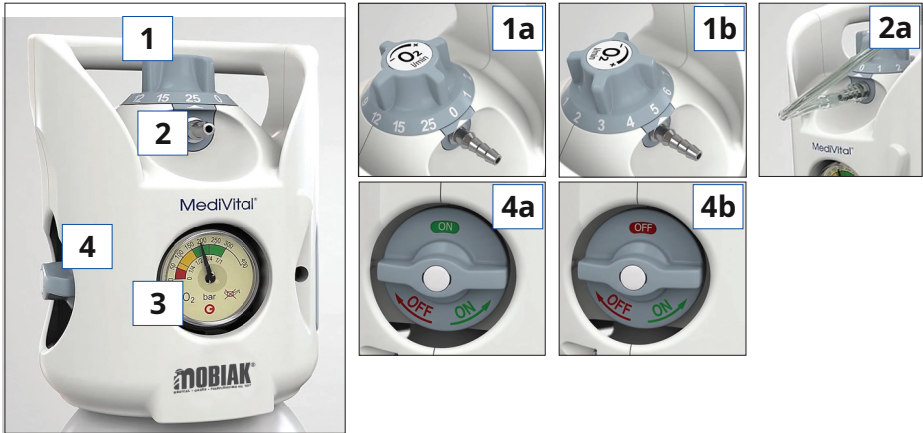

### ÎNAINTE DE UTILIZARE

Vă rugăm să verificați supapa combinată pentru orice semne de deteriorare sau contaminare. De asemenea, verificați dacă indicatorul de presiune a gazului **3** is showing sufficient gas for your needs. Please note that the Pressure Indicator **3** afișează întotdeauna presiunea curentă a gazului chiar și atunci când supapa de închidere **4** este în poziția oprit.

### Verificarea funcțiilor supapei combinate:

- Verificați dacă butonul de control al debitului **1** este setat la 0.
- Deschideți supapa de închidere **4** rotind-o încet până când ON este complet afișată în fereaștră **4a**.
- Verificați scurgerile ascultând dispozitivul.
- Rotiți butonul de control al debitului **1** clockwise to position 1 and check that gas is flowing through the outlet **2**.
- butonul de control al debitului **1** to check that gas flows from each of the different settings.
- Resetați butonul de control al fluxului **1a** la 0.

### UTILIZAREA SUPAPEI COMBinate

- Verificați dacă butonul de control al debitului **1** este setat la 0.
- Conectați accesoriile (canula sau mască) la priza de curgere **2a**.
- Deschideți supapa de închidere **4** rotind-o încet până când ON este complet afișată în fereaștră **4a**.
- Setați butonul de control al debitului în poziția prescrisă. Verificați dacă butonul de control al debitului este aliniat corect ca în exemplu **1b**.

**⚠ Înainte de a conecta orice accesoriu la priza de curgere, asigurați-vă că pacientul nu este conectat la dispozitiv.**

**Deschideți încet supapa de închidere!**

**Asigurați-vă întotdeauna că butonul de control al debitului a fost setat corect și nu a fost plasat între setări. Nu încercați să aplicați o forță excesivă asupra butonului de control al debitului!**

**Setarea corectă a butonului de control al debitului trebuie să fie informată de medicul dumneavoastră.**

### DUPĂ UTILIZARE

- Fully turn off the shut off valve by turning the handwheel clockwise until a firm resistance to rotation is reached **4b**.
- Dacă există dispozitive medicale conectate la priză, acestea ar trebui să fie ventilate.
- Deconectați orice dispozitiv medical de la priza de curgere **2a**
- Setați butonul de control al fluxului la 0 **1a**.

## GHID RAPID DE REFERINȚĂ

### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ






#### PĂSTRAȚI PRODUSUL ȘI ECHIPAMENTUL ASOCIAT DEPOZIT DE:

- Heat sources (fire, cigarettes, e-cigarettes...)
- Materiale inflamabile
- Tot uleiul și grăsimea? nu utilizați niciodată creme de mâini sau creme hidratante atunci când utilizați sau manipulați echipamentul.
- Apa
- Praf

Produsul și echipamentele asociate trebuie împiedicate să se răstoarne, să se răstoarne sau să cadă.

Mențineți întotdeauna standardele de curățenie în oxigen.

Utilizați produsul și echipamentele asociate numai într-o zonă bine ventilată.

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE	
	- 20* / +65 °C
	10 / 100 %
	600 / 1200 mbari

Nu utilizați supapa combinată la temperaturi sub -20°C.

Înainte de a conecta orice accesoriu sau dispozitiv medical la supapa combinată, verificați întotdeauna dacă sunt pe deplin compatibile cu caracteristicile de conectare și performanța produsului.

Dacă supapa combinată este deteriorată sau contaminată, nu o utilizați și contactați imediat furnizorul dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați departamentul nostru de asistență pentru clienți. Telefon:

+ 30 28210 63222

E-mail: [medicalexports@mobiak.com](mailto:medicalexports@mobiak.com)

Vizitați noul nostru site web [www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)