

UTILIZARE PREVENTATĂ:

Produsul este utilizat pentru transportul pacienților în situații de urgență sau în situații care necesită îndepărtarea rapidă și sigură a pacientului. Trebuie utilizat numai de către personal calificat și instruit, instruit în îngrijirea „de urgență”. Poate fi folosit în ambulanță, spital și medii sportive.

ATENȚIE (!):

- Dacă apare o problemă, NU utilizați produsul până când nu este reparat și contactați dealerul dumneavoastră autorizat și instruit
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă.
- MOBIK S.A. respinge orice responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau alte utilizări decât cele menționate în acest manual.
- MOVIK SA își rezervă dreptul de a aduce modificări produsului și următorului manual fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii caracteristicilor acestuia.
- Există o posibilitate de abatere a dimensiunilor produselor în intervalul de ±3%.
- Este întotdeauna recomandat să urmați procedurile concepute pentru a face față situațiilor de urgență.

AVERTISMENTĂRI GENERALE:

- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil decât dacă ați citit mai întâi și ați înțeles pe deplin acest manual de utilizare.
- Dacă nu reușiți să înțelegeți avertismentele, avertismentele sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, dealer sau personal tehnic înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar se pot produce vătămări sau deteriorări.
- CITIȚI cu atenție întregul manual înainte de a utiliza produsul.
- Păstrați acest formular pentru referințe viitoare.
- Produsul trebuie utilizat numai de personal calificat.
- Păstrați produsul departe de sursele de căldură.
- Aveți grijă când sunt copii în preajmă și NU lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrilor și rănirea

ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE:

1. Verificați dacă cadrul este deteriorat pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului (fără fisuri sau rupturi în cadrul).
2. În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați distribuitorul autorizat și instruit
3. Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt sigure și strânse.
4. Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea absolut sigură a produsului pentru persoane și obiecte.
5. Verificați periodic durabilitatea și stabilitatea.

UTILIZAREA PRODUSULUI:

Deschide targa.

Mutați cu succes pacientul pe targă și asigurați-l cu centurile.

Prezența mânerelor vă permite să ridicați pacientul apucând targa din diferite părți.

CURĂȚARE ȘI DEZINFECTIE:

- Folosiți doar o cârpă umedă și săpun ușor pe suprafețele care necesită curățare. Apoi uscați bine înainte de a utiliza produsul.
- NU lăsați produsul umed.
- Nu utilizați substanțe de curățare chimice pentru a curăța cadrul. Acest lucru poate deteriora suprafața de acoperire a produsului.
- Nu utilizați niciodată acizi, alcalii sau solvenți precum acetona.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Declarăm pe propria noastră răspundere că Produsele de Tehnologie Medicală menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc scăzută (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația menționate.

PROTECȚIA MEDIULUI:

Dacă descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor municipale (acesta este și semnificația simbolului de reciclare indicat).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele de eliminare a produsului dumneavoastră pentru reciclare.
- 3) Aruncând produsul dvs. acum nefolositor la punctul corect de reciclare, contribuiți la protejarea mediului, precum și la reutilizarea materialelor produsului dumneavoastră.

REPORT DE EVENIMENT:

Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului ar trebui raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

GARANTIE:

Produsul este garantat să funcționeze timp de (2) ani de la data achiziției. Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU acoperă piesele de uzură și care se pot uza în timpul utilizării sau în timp.

De asemenea, nu sunt acoperite de garanție daunele sau defecțiunile cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (acolo unde este prevăzut) și companii de transport. Nicio lucrare sau piese nu sunt acoperite decât dacă au fost inspectate de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru inspecție sunt plătite de către utilizator sau client sau de către comerciant

UTILIZARE PREVENTATĂ:

Produsul este utilizat pentru transportul pacienților în situații de urgență sau în situații care necesită o evacuare rapidă și sigură a pacientului. Trebuie să fie utilizat exclusiv de personal profesionist și calificat, instruit corespunzător pentru îngrijiri de urgență. Poate fi folosit în ambulanțe și în spitale și medii sportive.

ATENȚIE (!):

- În caz de deteriorare sau defecțiune a produsului dumneavoastră NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul într-un scop care nu este indicat în acest manual.
- MOBIK SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate dintr-o utilizare incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIK SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă
- Există un ± 3%. Abatere pentru dimensiunile produselor.
- Se recomandă întotdeauna să urmați procedurile concepute pentru răspunsul în caz de urgență.

AVERTISMENTĂRI GENERALE:

- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest dispozitiv sau o altă piesă disponibilă.
- Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau măsurile de precauție, vă rugăm să contactați distribuitorul sau persoana tehnică adecvată înainte de a utiliza dispozitivul, deoarece se pot produce daune.
- CITIȚI cu atenție întregul manual înainte de a utiliza produsul.
- Salvați acest document pentru referințe ulterioare.
- Produsul trebuie utilizat numai de personal calificat.
- Păstrați produsul departe de sursele de căldură.
- Aveți grijă când sunt copii în apropiere și nu permiteți copiilor să se joace sau să opereze cu dispozitivul.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrilor sau rănirea.

ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE:

1. Verificați dacă cadrul este deteriorat pentru a garanta o utilizare în siguranță a produsului (nu există fisuri sau fisuri în cadrul).
2. În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați distribuitorul pentru instrucțiuni suplimentare.
3. Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt sigure și bine înșurubate.
4. Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în siguranță absolută a produsului pentru persoane și obiecte.
5. Verificați periodic soliditatea și stabilitatea acestuia.

UTILIZAREA PRODUSULUI:

Deschide targa.

Mutați cu succes pacientul pe targă și asigurați-l cu centurile de siguranță.

Prezența mânerelor vă permite să ridicați pacientul apucând targa din mai multe părți.

CURĂȚARE ȘI DEZINFECTIE:

- Folosiți doar o cârpă umedă și săpun ușor pe suprafețele pe care necesită curățare. Apoi uscați bine înainte de a utiliza produsul.
- Uscați departe de lumina directă a soarelui.
- NU lăsați produsul umed.
- Nu utilizați substanțe de curățare chimice pentru a curăța cadrul. Acest lucru ar putea cauza deteriorarea suprafeței produsului.
- Nu utilizați niciodată acizi, alcalii sau solvenți precum acetona
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
- Protejați articolul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

PROTECȚIA MEDIULUI:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare în care trebuie aruncat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului contribuie la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

GARANTIE:

Produsul este garantat pe o perioadă de doi (2) ani de la data achiziției.

Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU SE aplică daunelor rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU SE APLICĂ pe piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp. Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (unde este cazul) și transportatorii nu sunt acoperite de garanție.

Nu se aplică niciun service sau piesă de schimb decât dacă a fost inspectată de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru mărfurile aflate în garanție trebuie plătite de utilizatorul final-client sau de dealer.

CARACTERISTICI TEHNICE

MBK COD	MATERIAL CADRU	TESTURĂ	MAX ÎNCĂRCA
0804591	ALUMINIU	PĂNZĂ (CULOARE PORTOCIAL), PLECATĂ	159 KG
0804592	Pânză-SPĂLĂTORIE	PĂNZĂ (CULOARE PORTOCIAL), PLECATĂ	159 KG
0804593	ALUMINIU	PVC (CULOARE PORTOCIAL), PLECATĂ	159 KG

MBK COD	DIMENSIUNI DESCHISE	DIMENSIUNI ÎNCHIS	DIMENSIUNI CUTIE
0804591	208 x 55 x 14 cm	104 x 18 x 11 cm	112 x 20 x 20 cm
0804592	205 x 71 cm (măsurare fără manerele)	74 x 35 cm	93 x 36,5 x 37 cm
0804593	84 x 60 x 98 cm	100 x 60 x 20 cm	100 x 61 x 20 cm





COD MBK	PIESE LA CUTIE	M.B. TEM	K.B. TEM	M.B. CUTIE	K.B. CUTIE
0804591	2	5,15 KG	4,78 KG	10,3 KG	9,56 KG
0804592	10	1,72 KG	1,57 KG	17,2 KG	15,7 KG
0804593	1	16 KG	14,5 KG	16 KG	14,5 KG



FORMUL DE GARANȚIE:

DETALII CUMPĂRĂTORI:	
NUMELE COMPLET NUMELE COMPLET:	
DATA CUMPĂRĂRII DATA CUMPĂRĂRII:	
TELEFON / Telefon:	
LOT SAU NUMĂR DE SERIE:	
DETALII DEALER	
NUME / NUMELE COMPLET:	
ADRESĂ / ADRESA:	
TELEFON / Telefon:	
SIGILUL ȘI SEMNĂTURA MAGAZIN / SEMNĂTURA ȘI SEMNĂTURA	

Interpretarea contribuțiilor găsite pe eticheta de pe cutie sau & în instrucțiunile de utilizare a produsului
Descrierea simbolurilor care au fost imprimate pe etichetă, cutie principală și/sau manual de utilizare

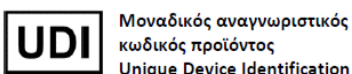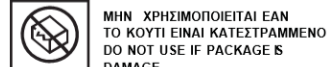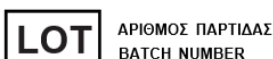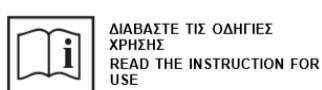

CARACTERISTICI TEHNICE

MBK COD	MATERIAL CADRU	PĂNZĂ	ÎNCĂRCARE MAX CAPACITATE
0804591	ALUMINIU	PĂNZĂ (CULOARE PORTOCIAL), IMPERMEABIL	159 KG
0804592	PĂNZĂ - LAVABIL	PĂNZĂ (CULOARE PORTOCIAL), IMPERMEABIL	159 KG
0804593	ALUMINIU	PVC (CULOARE PORTOCIAL), IMPERMEABIL	159 KG

MBK COD	DIMENSIUNI DESCHISE	DIMENSIUNI ÎNCHIS	CARTON DIMENSIUNI
0804591	208 x 55 x 14 cm	104 x 18 x 11 cm	112 x 20 x 20 cm
0804592	205 x 71 cm (măsurare fără mânere)	74 x 35 cm	93 x 36,5 x 37 cm
0804593	84 x 60 x 98 cm	100 x 60 x 20 cm	100 x 61 x 20 cm

COD MBK	PIESE PE CARTON	BUCATĂ GW	BUCATĂ NV	CARTON GW	CARTON NV
0804591	2	5,15 KG	4,78 KG	10,3 KG	9,56 KG
0804592	10	1,72 KG	1,57 KG	17,2 KG	15,7 KG
0804593	1	16 KG	14,5 KG	16 KG	14,5 KG

INSTRUCIUNI DE SPĂLARE PENTRU CODUL 0804592:

INSTRUCIUNI DE SPĂLARE PENTRU COD 0804592:

SPĂLARE DOAR ÎN MÂNĂ	DOAR SPĂLARE MANUALĂ
NON UTILIZARE ALBIRE	A NU SE FOLOSI ÎNĂLBITOR
NU CĂLCAȚI	NU CĂLCAȚI
NON UTILIZARE USCĂTOR	NU USCAȚI RĂMĂTORUL
NON UTILIZARE USCAT CURĂȚARE	NU CURĂȚAȚI CHIMIC
NU STORȚI	NU STORGI



INSTRUCIUNI DE UTILIZARE: CARRY

MANUAL DE UTILIZARE: TARGA

REF : 0804591 - 0804592 - 0804593

0804591



0804592



0804593



MBK COD	GTIN-14	DESCRIERE GR	RO DESCRIERE
0804591	05213006907159	TARGA PLIATA DUPA LUNGIME SI LATIME	TARGA PLIANTĂ, SINGUR PUTEA
0804592	05213006907166	FoaiE DE TRANSPORT CU ȚINE DE MÂNĂ	TARGA MOALE
0804593	05213006907173	SCAUN SCARA ALUMINIU, SCAUN SCARA	TARGA SCAUN SCARA

MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

