



GR EN

MOBIACARE®
MEDICAL EQUIPMENT

**INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: SACAU ROANT PENTRU COPII "SAMMY" ΓΙΑΣ
CADRUPLU**

**MANUAL DE UTILIZARE: SCAUN ROTUL PENTRU COPII PARALIZI CEREBALA LSY
"SAMMY"**

REF: 0811312 și 0811313

CE

UTILIZARE PREVENTATĂ

Scaunele cu roțile sunt concepute pentru persoanele cu dizabilități fizice sau psihice care au mobilitate personală limitată sau inexistentă și numai pentru transport.

0811313



0811312



CARACTERISTICKA

SCHELET	Aluminiu
CULOARE	Negru
SCAUN	Întărit cu țesătură
LATERALĂ	Stabil
PICIOARELE	Lungime și înclinare reglabile
ROȚI SPATE	Compact de 12".
ROȚI FAȚĂ	8" x 2" Compact (200x50mm)
FRÂNE	Pe roțile din spate

DIMENSIUNI

0811312 0811313	32 cm	24-27 cm	28 cm	38-56 cm	66 cm	80 cm	100-118 cm	53 cm	12"8"	60 kg	16,9 kg

MONTAJ

Vă rugăm să-l consultați **ANEXA A**

SIMBOLULE

Vă rugăm să-l consultați **ANEXA B**

ÎNTREȚINERE

Verificarea periodică a următoarelor proceduri va ajuta la menținerea duratei de viață și a eficienței scaunului dumneavoastră cu roțile.

SĂPTĂMÂNAL

- Verificați dacă șurubul central al brațului transversal este strâns și în stare bună.
- Curățați tapetul cu apă cu săpun sau alte produse adecvate. (cu cârpă uscată dacă scaunul din piele)
- Curățați părțile metalice ale scaunului cu roțile cu o cârpă uscată sau produse speciale pentru suprafețe cromate sau vopsite.
- Verificați blocajele roților și reglați-le dacă este necesar.
- Verificați uzura roților din față și din spate.

TRIMESTRIAL

- Lubrifiați cu unsoare sau ulei toate piesele supuse abraziune sau uzură iminentă.
- Asigurați-vă că toate piulițele și șuruburile sunt strânse, dar nu prea strânse.
- Verificarea generală a stării scaunului cu roțile și repararea oricăror necesare.

ANUAL

- Vă recomandăm o inspecție completă o dată pe an la un specialist furnizor de servicii.
- Pentru siguranța pacientului, vă recomandăm ca dispozitivul să fie verificat de către producătorul la fiecare 2 ani. În caz de reparație, utilizați numai piese de schimb originale.

CURĂȚARE

Pe lângă întreținere și inspecție, se poate face și o curățare generală atât a cadrului cât și a tapiteriei.

- Pentru a-și menține aspectul, tapetul trebuie curățat în mod regulat.
- Murdăria poate fi îndepărtată cu un burete și un blând detergent cu apă caldă, ștergând în direcția texturii.
- Clătiți cu apă curată înainte de a lăsa să se usuce.
- Nu așezați tapetul într-un uscător. Dacă murdăria este grea, suprafața trebuie curățată cu o perie moale.
- Cadrul trebuie curățat regulat cu un detergent slab.
- Scaunele cu roțile cu scaun din piele trebuie curățate cu o cârpă uscată.
- Curățați roțile cu apă caldă și săpun delicat. Fii atent la roțile ude, este periculos să folosiți scaunul cu roțile ude.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături

IMPORTANT(!)

Construcția acestui scaun cu rotile este concepută pentru a oferi siguranță maximă. Cu toate acestea, utilizatorii se pot expune în pericol prin utilizarea inadecvată a scaunelor cu rotile. Pentru propria dumneavoastră siguranță, trebuie respectate regulile din manual. Munca de reglare sau reglare necalificată sau incorectă poate crește riscul de accidente.

- Purtați întotdeauna haine de culoare deschisă atunci când vă deplasați în locuri întunecate, astfel încât să puteți fi văzut cu ușurință.

- Aveți grijă la prima călătorie cu acest scaun cu rotile
- Cunoaște-ți scaunul cu rotile.
- Utilizați scaunul cu rotile atât pe un teren plan, cât și în sus și în jos.
- Nu încercați să ajungeți la obiecte dacă trebuie să le ridicați de pe podea, ajungând între genunchi.
- Nu încercați să atingeți obiecte dacă trebuie să vă mutați pe scaun.
- Nu folosiți scaunul cu rotile pe autostrăzi.
- Nu utilizați scaunul cu rotile pe un drum sau suprafață cu apă, gheață sau lubrifianți.
- Folosiți întotdeauna accesorii sau adaptoare aprobate de MOBIAK.
- Nu stați pe cadrul scaunului cu rotile

SA ȘEZI ÎN SCAUN ROTUL:

1. Poziționați scaunul cu rotile cât mai aproape de dvs.
2. Fixați roțile.
3. Țineți-vă de părțile laterale și așezați încet în poziție.

PENTRU A COȘI DIN SCAUN ROTUL:

1. Așezați scaunul cu rotile cât mai aproape de poziția în care veți fi transferat.
2. Fixați roțile.
3. Rezemați-vă uniform pe ambele mâner. Sprijinul cu o singură mână (și fără însoțitor) poate cauza daune sau răni.
4. Așezați greutatea corporală în poziția de transportat.

ALTE INSTRUCȚIUNI:

1. Folosiți întotdeauna ascensoare sau rampe. Dacă acestea nu sunt disponibile, puteți ajunge la destinație cu ajutorul a doi însoțitori. Ei trebuie să ridice scaunul cu rotile din secțiunile fixe. Un scaun cu rotile nu ar trebui să fie niciodată ridicat. Ar trebui doar să împingeți.
2. Evita pașii sau obstacolele, în caz contrar cere ajutor însoțitorului tău
3. Acest scaun cu rotile trebuie folosit doar pentru a transporta o singură persoană odată pe scaun.
4. Utilizatorii nu trebuie să stea în scaunul cu rotile când se află în transportul public

5. Scaunele cu roțile au o frână pe roțile din spate care ar trebui să fie cuplată atunci când scaunul cu roțile nu este în mișcare.
6. NU călcați pe suporturile pentru picioare pentru a vă așeza sau a vă ridica, RISC să vă răsturnați. Suporturile pentru picioare servesc pentru ca utilizatorul să calce atunci când este așezat.
7. NU atingeți piesele în mișcare în timpul mișcării RISC de rănire.



AVERTIZARE ⚠️

- NU utilizați acest produs sau orice alt produs disponibil echipament opțional, dacă nu ați citit mai întâi și nu ați înțeles pe deplin acest manual de utilizare.
Dacă nu reușiți să înțelegeți avertismentele, avertismentele sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, dealer sau personal tehnic înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar se pot produce vătămări sau deteriorări.
- Țineți produsul departe de sursele de căldură.
- Aveți grijă când sunt copii prin preajmă și NU îi lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Nu depășiți sarcina utilă maximă.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există piese în mișcare părți care pot provoca încurcarea membrelor și rănirea
- Nu încercați să ridicați scaunul cu roțile de pe orice piesa asamblata.
- A intra și a coborî din scaunul cu roțile fără asistența necesită forța și mobilitatea necesară pentru partea superioară a corpului.



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor municipale (acesta este și semnificația simbolului de reciclare indicat).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele de eliminare a produsului dumneavoastră pentru reciclare.
- 3) Aruncând produsul dvs. acum nefolositor la punctul corect de reciclare, contribuiți la protejarea mediului, precum și la exploatarea din nou a produselor dumneavoastră.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declarăm pe propria noastră răspundere că Produsele de Tehnologie Medicală menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc scăzută (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația menționate.

REPORT DE EVENIMENT:

Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

GARANȚIE

Produsul este garantat să funcționeze timp de doi (2) ani de la data achiziției. Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU acoperă piesele de uzură precum tapițeria, roțile sau frânele și care se pot uza în timpul utilizării sau în timp.

Daunele sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie (acolo unde este prevăzut) și companiile de transport nu sunt, de asemenea, acoperite de garanție.

Nicio lucrare sau piese nu sunt acoperite decât dacă au fost inspectate de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru inspecție sunt plătite de către utilizator sau client sau de către comerciant.

FORMUL DE GARANȚIE

DETALII CUMPARATOR			
NUMELE COMPLET:			
DATA CUMPĂRĂRII:		TELEFON:	
SERIAL NUMĂR:			
Lot:			
DETALII MAGAZIN			
NUME:			
ADRESA:			
TELEFON:			
SIGILUL ȘI SEMNATURA MAGAZINULUI			



MOBIAC S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



UTILIZARE PREVONTATĂ:

Aceste scaune cu roțile au fost concepute pentru persoanele cu handicap fizic sau mintal cu mobilitate redusă doar pentru transport.

0811313



0811312



SPECIFICAȚIIONS

CADRU	Aluminiu
CULOARE	Negru
SCAUN	Țesătură întărită
BUFET	Stabil
SUPORT PIU PIU	Lungime și înclinare reglabile
ROȚI SPATE	Compact de 12".
ROȚI FAȚĂ	8" x 2" Compact (200x50mm)
FRÂNE	Pe roțile din spate

DIMENSIUNIS

0811312 0811313	32 cm	24-27 cm	28 cm	38-56 cm	66 cm	80 cm	100-118 cm	53 cm	12"8"	60 kg	16,9 kg

ASAMBLARE

Vă rugăm să consultați ANEXA A

SIMBOLULE

Vă rugăm să consultați ANEXA B

ÎNTREȚINERE

Revizuirea periodică a procedurilor de mai jos va ajuta la menținerea duratei de viață și a eficacității scaunului dumneavoastră cu roțile.

SĂPTĂMÂNAL

- Verificați presiunea la roți urmând instrucțiunile de pe roți. Dacă există roți pneumatice pe scaunul cu roțile.
- Verificați dacă șurubul central al brațului transversal este strâns și în stare bună.
- Curățați țesătura cu apă cu săpun sau produse suficiente.
- Curățați părțile metalice ale scaunului cu o cârpă uscată sau cu produse speciale pentru suprafețe cromate sau suprafețe vopsite.
- Verificați șuruburile roții și reglați dacă este necesar.
- Verificați dacă roțile din față și din spate sunt deteriorate.

TRIMESTRIAL

- Verificați și reglați dacă este necesar: furcile roților, axele roților și janta de mână a roților din spate. Ungeți sau ungeți toate componentele care sunt supuse frecării sau uzării iminente.
- Asigurați-vă că toate piulițele și șuruburile sunt strânse, dar nu prea strânse.
- Revizuirea generală a stării scaunului și repararea la orice este necesar.

ANUAL

- Vă recomandăm o revizuire completă o dată pe an unui furnizor de servicii calificat.
- Pentru siguranța pacientului, recomandăm ca scaunul rulant să fie verificat de către producător la fiecare 2 ani. În caz de reparație, utilizați numai piese de schimb autentice.

CURĂȚARE

Pe lângă întreținere și inspecție, atât cadrul, cât și tapițeria pot fi curățate temeinic.

- Pentru a-și menține aspectul, materialul trebuie curățat în mod regulat.
- Murdăria poate fi îndepărtată cu un burete și un detergent ușor cu apă caldă, măturând în direcția texturii.
- Clătiți cu apă curată înainte de a-l lăsa să se usuce.
- NU lăsați scaunul cu roțile umed.
- Nu așezați materialul într-un uscător de rufe. Dacă murdăria este adâncă, suprafața trebuie curățată cu o perie moale.
- Cadrul trebuie curățat regulat cu un detergent slab.
- Scaunele cu roțile cu scaune din piele trebuie curățate cu o carpa uscată.
- Curățați roțile cu apă caldă și săpun delicat. Acordați atenție la uscarea roților. Este periculos să folosiți scaunul cu roțile cu roțile ude.
- Dacă trebuie să dezinfecțati produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
- Protejați articolul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.

IMPORTANT!!

Construcția acestui scaun cu rotile este concepută pentru a oferi siguranță maximă. Cu toate acestea, utilizatorii pot fi expuși riscului dacă își folosesc scaunele cu rotile neadecvate. Pentru propria dumneavoastră siguranță, trebuie respectate următoarele reguli. Nespecifică sau incorectă lucrările de reglare pot crește riscul de accidente.

- Purtați întotdeauna haine de culoare deschisă atunci când vă deplasați în locuri întunecate, astfel încât să puteți fi contactat mai mult. ușor de la alții.
- Fiți atenți în timpul primului dumneavoastră curs în acest scaun cu rotile.
- Faceți cunoștință cu scaunul cu rotile.
- Folosiți scaunul cu rotile pe teren plan, precum și în urcare și în deal.
- Nu încercați să ajungeți la obiecte dacă trebuie să le ridicați de pe podea, ajungând între genunchi.
- Nu încercați să ajungeți la obiecte dacă trebuie să vă deplasați pe scaun.
- Nu utilizați pe drumuri sau autostrăzi.
- Nu încercați să urcați sau să coborâți cu apă, gheață sau membrană de ulei.
- Nu utilizați piese, accesorii sau adaptoare neautorizate, altele decât cele aprobate, de către producător.
- Nu stați în scaunul cu rotile.
- Nu folosiți bufetul ca platformă atunci când intrați sau ieșiți din scaunul cu rotile.

ASEZATI PE SCAUN ROTUL:

1. Poziționați scaunul cu rotile cât mai aproape de dvs.
2. Activați blocarea roților.
3. Rezemați-vă de cadru cu brațele și coborâți încet spre scaun.

RIDICATUL DIN SCAUN ROTUL:

1. Poziționați scaunul cu rotile cât mai aproape posibil de scaunul la care vă transferați.
2. Activați blocarea roților.
3. Trebuie să se bazeze pe ambele mâneri în mod egal. Sprijinirea unei singure mâini (și nesupravegheată) poate provoca vătămări.
4. Mutați greutatea corporală pe scaunul pe care urmează să-l transferați.

ALTE INSTRUCȚIUNI:

1. Folosiți întotdeauna ascensoare și rampe. Dacă acestea nu sunt disponibile, puteți ajunge la destinație cu ajutorul a două escorte. Aceștia trebuie să ridice scaunul cu rotile ținând părți stabile ale cadrului. Un scaun cu rotile nu trebuie să fie niciodată ridicat în timp ce un pasager este așezat. Ar trebui doar împins.
2. Evitați scările sau obstacolele, altfel cereți ajutor de la însoțitor:
3. Acest scaun cu rotile trebuie folosit numai pentru a transporta câte o persoană pe scaun.

4. Utilizatorii nu trebuie să stea într-un scaun cu roțile în timp ce folosesc orice mijloc de transport.

5. Scaunele cu roțile au o frână pe roțile din spate, care ar trebui să fie asigurată atunci când scaunul cu roțile nu se mișcă.

6. NU împingeți suporturile pentru picioare pentru a vă așeza sau a vă ridica în picioare, PERICOL DE RĂSCULARE. Suporturile pentru picioare sunt folosite de utilizator atunci când El sau Ea este așezat.

7. NU atingeți piesele în mișcare în timpul mișcării PERICOL DE RĂNIRE



AVERTIZARE

- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă.
Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau măsurile de precauție, vă rugăm să contactați dealerul sau persoana tehnică adecvată înainte de a utiliza produsul, deoarece pot fi cauzate daune.
- Păstrați produsul departe de surse de căldură.
- Aveți grijă când copiii sunt în apropiere și nu permiteți copiilor să se joace cu produsul.
- Nu depășiți sarcina utilă maximă.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrilor și rănirea.
- Nu încercați să ridicați scaunul cu roțile cu ajutorul niciunei părți detașabile.
- Starea în scaun și ridicarea în picioare din scaunul cu roțile poate fi efectuată independent, dar necesită forță și mobilitate pe partea superioară a corpului



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare în care trebuie aruncat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului contribuie la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

GARANTIE:

Produsul este garantat pe o perioadă de doi (2) ani de la data achiziției.

Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului. De asemenea, NU acoperă piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp, cum ar fi tapițeria, roțile sau frânele.

Daune sau defecte cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de aprovizionare (unde este cazul), transportatorii nu sunt acoperiți de garanție

Niciun service sau piesă de schimb nu este acoperit dacă nu a fost inspectat de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru mărfurile în garanție sunt plătite de utilizator-client sau de dealer.

FORMUL DE RECLAMARE GARANȚIE

DETALII CUMPĂRĂTORI:			
NUMELE COMPLET:			
CUMPĂRARE DATE:		TELEFON::	
SERIAL NUMĂR:			
Lot:			
DETALII DEALER			
NUMELE COMPLET:			
ADRESA:			
Telefon:			
SEMNĂTURA ȘI SEMNĂTURA			

ANEXA A. ΜΟΝΤΑΖ ΑΝΕΧΑ Α. ΑΣΜΟΓΗΣΗ **ΜΟΝΤΑΖ. ASSEMBLY**

O deschidem
ambalare.

Deschide pachetul.



Scoatem toate
articole din
căţea.

Scoateţi totul din cutie
piesele



Cu o simplă apăsare
sprijinul lui
scaun,
scaunul cu rotile
se dezvoltă.
Sună o
caracteristică
clic pe sunet.

Cu simpla presiune
pe suportul scaunului,
scaunul cu rotile
creste. Tipicul
se aude un clic.



Când o asigură
scaun cu roțile. Se pare că
urmând.

Când scaunul cu roțile este
asigurat. Se pare că
urmează.




Apoi
îl plasăm
scaun la
prize corespunzătoare
a scaunului cu roțile.

Apoi așezați scaunul în
straturile corespunzătoare
a scaunului cu roțile.



Ne plasăm în
poziționați-le corect
sigurante roșii
a scaunului și
pe ambele părți.

Așezați suporturile roșii
pentru scaune în poziția
corectă pe ambele părți.

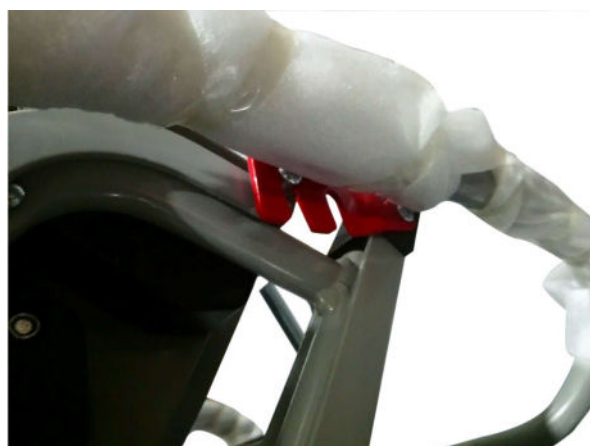

Apăsând în același timp
cele două chei,
brațul de împingere
poate veni la
poziția corectă.

Apăsând cele două
taste în același timp,
brațul de împingere
poate veni corect
poziție.



Îl instalăm
coperta ei
extensia spatelui
după ce trecem de
centura de la
pozițiile corespunzătoare. The
must de plastic
trece și tu prin ea
piesa metalică.

Așezați spătarul
capac extensie după
trecând zona din
corespunzătoare
poziții. Plasticul
trebuie să treacă și de la
partea metalică.




REGLAREA ÎNĂLȚIMEI SPATARELOR, INCLINAREA SPATARELOR ȘI LĂȚIȚILE SAZULUI

REGLAREA ÎNĂLȚIMII SPĂTARULUI, INCLINAREA SPĂTARULUI ȘI LĂȚIMENI SAZULUI

Îndepărtați-l
coperta din spate
și perna lui
a scaunului său
scaun cu roțile. The
perna de scaun
poate fi eliminat
cu deschidere de
butoane ca
prezentată în imagine.



Scoateți spătarul
husa și scaunul
perna de
scaun cu roțile. Scaunul
perna poate fi
îndepărtat prin deschidere
butoanele așa cum se arată
în imagine.

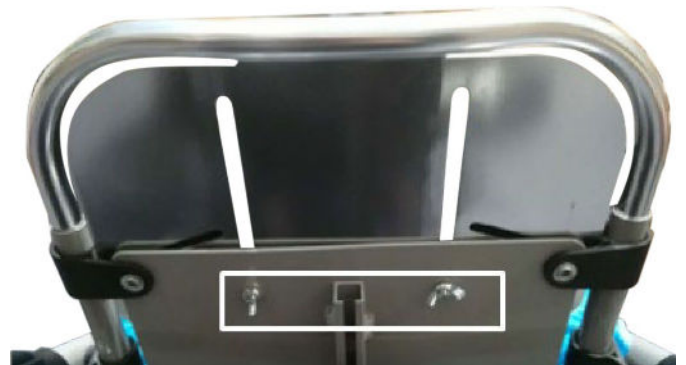


Relaxându-i
nuci avem
capacitatea de a
reglați înălțimea
a tetierei
la înălțimea dorită.

După relaxare
nuci, avem
capacitatea de a
regla înălțimea tetierei
la potrivit
poziție.



Relaxează-le
cele patru șuruburi ale sale
scaun și
personalizați-l
latime de in
poziție adecvată.

Slăbiți cele patru
șuruburi pe scaun
și
reglați lățimea la
poziția potrivită.

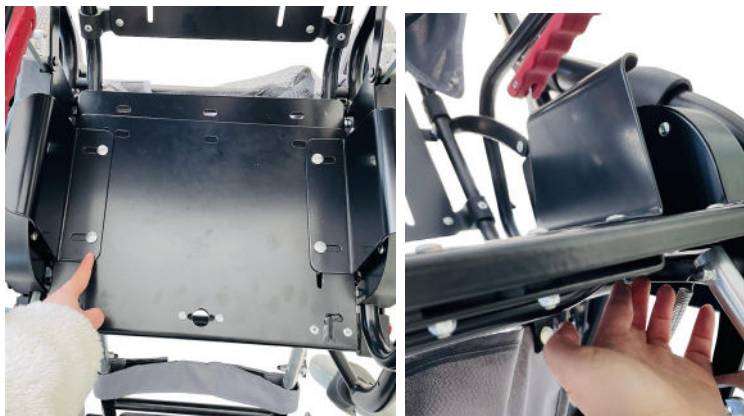

Reinstalați-l
perna lui
scaunul și
coperta din spate.

Reinstalați scaunul
pernă și spătar
acoperi.



Relaxându-l
reglator de înclinare
putem seta
scaunul înăuntru
poziția dorită.

Relaxarea înclinării
regulator, putem
pune scaunul la dorit
poziție.



O adaugam
încălinat
umbrire prin apăsare
adaptoarele la
cadrul scaunului cu rotile.

Adăugați nuanța încălinată
prin apăsarea butonului
adaptoare la cadru.



Le adaugam
suporturi pentru picioare în
poziție specifică.
Reglarea încălinării
suportul pentru picioare este realizat
din specific
selector.

Adăugați suporturile pentru picioare la
această poziție.
Încălinarea este reglată de
selectorul.



Scaunul cu rotile este
gata de utilizare.

Scaunul cu rotile este
gata de utilizare.





















ANEXA B: SIMBOLURIS

ANEXA B: SIMBOLURIS

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and/or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive