

UTILIZARE PREVONTATĂ:

Aceste șine sunt un produs conceput pentru a împiedica o persoană să cadă accidental din orice pat de spital sau de îngrijire la domiciliu.

Potrivit pentru cele mai multe paturi metalice și cu un sistem de manipulare ușor, astfel încât să nu fie nevoie să fie îndepărtate complet pentru a transporta pacientul în și din pat. Sunt concepute pentru a se potrivi cu majoritatea patului datorită cadrului simplu, care poate fi plasat sub salteaua patului.

ATENȚIE(!):

- Dacă apare o problemă, NU utilizați produsul până când nu este reparat și contactați dealerul dumneavoastră autorizat și instruit
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă
- MOBIAK S.A. respinge orice responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau alte utilizări decât cele menționate în acest manual.
- MOVIK SA își rezervă dreptul de a aduce modificări produsului și următorului manual fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii caracteristicilor acestuia.
- Există o posibilitate de abatere a dimensiunilor produselor în intervalul de ±3%.

AVERTISMENTĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ:

- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil decât dacă ați citit mai întâi și ați înțeles pe deplin acest manual de utilizare.

Dacă nu reușiți să înțelegeți avertismentele, avertismentele sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, dealer sau personal tehnic înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar se pot produce vătămări sau deteriorări.

- Păstrați produsul departe de surse de căldură.
- Păstrați acest formular pentru referințe viitoare.
- Aveți grijă când sunt copii în preajmă și NU lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrilor și rănirea
- Nu încercați să ridicați produsul de nicio piesă de asamblare.
- Nu utilizați produsul în alt scop decât cel prevăzut
- Balustradele nu sunt destinate să susțină întreaga greutate a unei persoane.
- SINELE NU POATE FI UTILIZATE PE UN PATUL MULTIPLU, ALTER NU VA FUNCȚIONA șinele.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Declarăm pe propria noastră răspundere că Produsele de Tehnologie Medicală menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc scăzut (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația menționate.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

- Verificați dacă cadrul este deteriorat pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului. Nu există fisuri sau rupturi în cadru,
- În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați distribuitorul autorizat și instruit
- Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt sigure și bine strânse.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea absolut sigură a produsului pentru persoane și obiecte.

**PROTECȚIA MEDIULUI:**

Dacă descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor municipale (acesta este și semnificația simbolului de reciclare indicat).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele de eliminare a produsului dumneavoastră pentru reciclare.
- 3) Aruncând produsul dvs. care nu mai este utilizabil la punctul de reciclare corect, contribuiți la protejarea mediului, precum și la reutilizarea materialelor produsului dvs..

INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEZINFECTIE:

Pentru a asigura o utilizare în siguranță și un nivel adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

Utilizatorul trebuie să asigure integritatea structurală a produsului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și dezinfectie, urmați pașii de mai jos:

1. Trebuie să purtați mănuși.
2. Îndepărtați impuritățile vizibile înainte de a trece la o dezinfectie mai aprofundată.
3. Utilizați apă sau detergent slab pentru procesul de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
5. NU lăsați produsul umed.
6. Nu folosiți substanțe de curățare chimice pentru a curăța cadrul. Acest lucru poate provoca deteriorarea suprafeței de acoperire a produsului.
7. Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
8. Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături.
9. Lubrifiere: produsul este conceput pentru întreținere minimă. Cu toate acestea, verificați la fiecare șase luni de lubrifiere a pieselor mobile-mecanice, aceasta va asigura o durabilitate optimă.

REPORT DE EVENIMENT: Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului ar trebui raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

UTILIZARE PREVONTATĂ:

Sina de noptieră este un accesoriu conceput pentru a preveni căderea accidentală a unei persoane de pe orice pat pentru spital sau îngrijire la domiciliu.

Potrivit pentru cele mai multe paturi metalice și cu sistem de control ușor, astfel încât nu trebuie să fie complet îndepărtat pentru transportul pacientului la și de la pat. Sinele de noptieră sunt concepute pentru a se potrivi în majoritatea patului datorită cadrului său simplu, care poate fi plasat sub salteaua patului.

ATENȚIE (!):

- În caz de deteriorare sau defecțiune a produsului dumneavoastră NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul într-un scop care nu este indicat în acest manual
- MOBIK SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate dintr-o utilizare incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIK SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă
- Există un ± 3%. Abatere pentru dimensiunile produselor.

AVERTISMENTĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ:

- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă. Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau măsurile de precauție, vă rugăm să contactați dealerul sau persoana tehnică adecvată înainte de a utiliza produsul, deoarece pot fi cauzate daune.

- Păstrați produsul departe de surse de căldură.
- Salvați acest document pentru referințe ulterioare.
- Aveți grijă când copiii sunt în apropiere și nu permiteți copiilor să se joace cu produsul.

- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrilor și rănirea.

- Nu încercați să ridicați produsul cu ajutorul niciunei părți detașabile.

- Nu utilizați scaunul pentru produs în alt scop decât cel prevăzut.

- Barele de noptieră nu sunt destinate să suporte întreaga greutate a unei persoane.

- SINELE NU POATE FI UTILIZATE PE PAT CU DOUĂ MANNIVELĂ. Altfel NU VA FUNCȚIONA RIDICAREA PIECILOR.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

- Verificați dacă cadrul este deteriorat pentru a garanta o utilizare în siguranță a produsului. (Nu există fisuri sau fracturi în cadru).
- În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați dealerul pentru instrucțiuni suplimentare.
- Verificați dacă produsul este asamblat corect și toate șuruburile sunt sigure și bine înșurubate.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în siguranță absolută a produsului pentru persoane și obiecte

**PROTECȚIA MEDIULUI:**

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și semnificația simbolului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare în care trebuie aruncat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului contribuie la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEZINFECTIE:

Pentru a garanta o utilizare în siguranță și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați pașii de mai jos:

1. Trebuie purtate mănuși.
2. Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a continua cu cea mai precisă dezinfectie.
3. Utilizați apă sau detergent ușor pentru procedura de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
5. **NU lăsați produsul umed.**
6. Nu folosiți substanțe de curățare chimice pentru a curăța cadrul. Acest lucru ar putea cauza deteriorarea suprafeței produsului
7. Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor
8. Protejați articolul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.
9. Lubrifiere: produsul a fost proiectat pentru întreținere minimă? totuși, verificați la fiecare șase luni lubrifierea pieselor mobile și mecanice, acest lucru ar asigura o durată optimă.

RAPORTAREA INCIDENTELOR: Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente a statului membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.



MONTAJ:

NOTĂ: Ilustrațiile de asamblare sunt orientative pentru a face asamblarea mai ușoară și pot diferi de realitate.

Produsul se livrează asamblat și gata de utilizare.

Pentru a atasa șinele la pat:

1. Așezați tuburile telescopice pe podea și așezați balustradele în locașurile speciale.
2. Așezați structura asamblată deasupra cadrului patului.
3. Reglați lățimea tuburilor telescopice în funcție de cadrul patului și fixați cu șurubul inclus în pachet.
4. Așezați salteaua peste tuburile telescopice (Greutatea salteii și utilizatorul mențin șinele stabile și sigure).
5. Dacă este necesar, este posibil să atașați tuburile telescopice de cadrul patului folosind curele (nu sunt furnizate în pachet)
6. Folosiți butonul de pe laterale pentru a regla înălțimea.

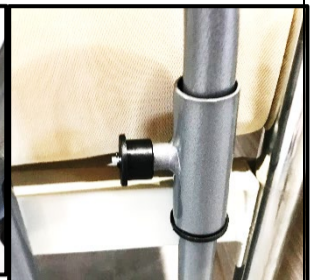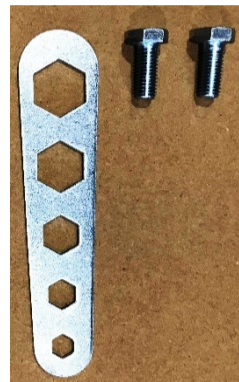CONȚINUT PACHET:

MBK COD	GTIN-14	DESCRIERE GR	RO DESCRIERE
0803153	05213006904325	SINE PLIANTE EXTERIOR PATUL	SINE TELESCOPICE EXTERIOARE-AJUSTABLE

Lungime reglabilă	REGLABIL LUNGIME	110-180 cm
LĂȚIME REGLABLE	LATĂ REGLABLE	98-170 cm
ÎNĂLȚIME REGLABLE	REGLABIL ÎNĂLȚIME	24 cm și 35 cm și 44 cm
GREUTATE NETĂ	GREUTATE NETĂ	11 Kg
GREUTATE BRUTĂ	GREUTATE BRUTĂ	12,5 Kg
DIMENSIUNEA CUTIEI	CARTON DIMENSIUNE	112x7x51 cm

GARANTIE:

Produsul este garantat să funcționeze timp de un (1) an de la data achiziției. Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU acoperă piesele de uzură și care se pot uza în timpul utilizării sau în timp.

Deteriorări sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (acolo unde este prevăzut), companiile de transport de asemenea nu sunt acoperite de garanție.

Nicio lucrare sau piese nu sunt acoperite decât dacă au fost inspectate de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru inspecție sunt plătite de către utilizator sau client sau de către comerciant

GARANTIE:

Produsul este garantat pe o perioadă de un (1) an de la data achiziționării.

Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU SE aplică daunelor rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU SE APLICĂ pe piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp. Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (unde este cazul) și transportatorii nu sunt acoperite de garanție.






Nu se aplică niciun service sau piesă de schimb decât dacă a fost inspectată de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru mărfurile aflate în garanție trebuie plătite de utilizatorul final-client sau de dealer.

FORMUL DE GARANȚIE:

DETALII CUMPĂRĂTORI:	
NUMELE COMPLET	NUME:
DATA CUMPĂRĂRII	DATE:
TELEFON /	Telefon:
LOT SAU NUMĂR DE SERIE:	
DETALII DEALER	
NUME /	NUMELE COMPLET:
ADRESĂ /	ADRESA:
TELEFON /	Telefon:
SIGILUL ȘI SEMNĂTURA MAGAZIN / SEMNĂTURA ȘI SEMNĂTURA	

Interpretarea contribuțiilor găsite pe eticheta de pe cutie sau & în instrucțiunile de utilizare a produsului

Descrierea simbolurilor care au fost imprimate pe etichetă, cutie principală și/sau manual de utilizare

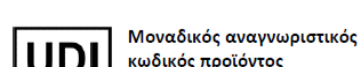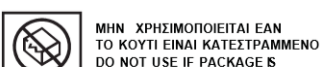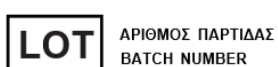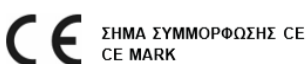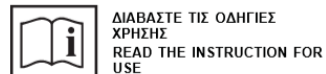

REF : 0803153

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: BINE PAT PUTABILE

MANUAL DE UTILIZARE: SINE EXTERNE TELESCOPICE- REGLABILE

MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

