

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ "PRIME"

0805519



EL

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ "PRIME" ΠΡΩΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Η σειρά καθίσμα μπάνιου "PRIME" επιτρέπει στο χρήστη αύξηση της ανεξαρτησίας κατά τη διάρκεια του ντους, στην καθημερινή προσωπική υγιεινή, μειώνοντας την μυϊκή κόπωση λόγω της όρθιας θέσης καθώς και των κινδύνων ολίσθησης και τραυματισμών. Το καθίσμα ντους μπορεί να μετακινηθεί εύκολα λόγω του μικρού βάρους του. Η επιτοίχια έκδοση με τον πτυσσόμενο μηχανισμό, όπου διατίθεται, καθιστά το προϊόν αυτό κατάλληλο ακόμη και για μικρά μπάνια και βοηθά το χρήστη να διατηρεί τακτοποιημένο τον χώρο του ντους και απαλλαγμένο από εμπόδια.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Το καθίσμα μπάνιου "PRIME" παρέχει υποστήριξη σε ηλικιωμένους, χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, άτομα με μειωμένη κινητικότητα των κάτω άκρων, οσφυϊκής χώρας και ισχίου, και σε όλους όσους έχουν δυσκολία να διατηρήσουν την όρθια θέση κατά τη διάρκεια του ντους της καθημερινής προσωπικής υγιεινής. Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να κρατήσει από μόνος του την ισορροπία όταν κάθεται και όταν σηκώνετε καθώς και να έχει επαρκή ικανότητα να διατηρεί τον εαυτό του σε καθιστή θέση. Το καθίσμα μπάνιου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν ο χρήστης έχει προβλήματα που σχετίζονται με διαταραχές ισορροπίας ή αντίληψης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Το μέγιστο βάρος χρήστη που αναφέρεται στις οδηγίες τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβαίνεται.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καθίσμα είναι σωστά συναρμολογημένο σε σταθερή θέση.
- Το καθίσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε επιφάνεια χωρίς εμπόδια.
- Κατά τη συναρμολόγηση, πρέπει αυστηρά ότι αναγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ο κίνδυνος τραυματισμού των δακτύλων μπορεί να αυξηθεί κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ή συναρμολόγησης.
- Μην ταλαντεύετε στο καθίσμα, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ολίσθηση, ανατροπή.
- Για κανένα λόγο, Μην τροποποιείτε το καθίσμα μπάνιου και τα εξαρτήματά του.
- Μην χρησιμοποιείτε το καθίσμα εάν έχει υποστεί ζημιά ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Οι ρωγμές και οι παραμορφώσεις μπορούν να επηρεάσουν έντονα την απόδοση και την ασφάλεια της συσκευής.
- Μετά τη χρήση, το επιτοίχιο καθίσμα πρέπει να διπλωθεί στην κατάσταση μη χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε το καθίσμα για διαφορετικό σκοπό από τον προβλεπόμενο.
- Το καθίσμα δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συντήρηση του προϊόντος περιλαμβάνει τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση και το κατάλληλο επίπεδο υγιεινής, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί αυτές τις διαδικασίες πριν από κάθε χρήση. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει τη δομική ακεραιότητα του προϊόντος και των εξαρτημάτων αυτού. Για τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πρέπει να φοράτε γάντια.
2. Αφαιρέστε τις εμφανείς ακαθαρσίες πριν προχωρήσετε σε πιο λεπτομερή απολύμανση.
3. Χρησιμοποιήστε νερό ή ήπιο απορρυπαντικό για τη διαδικασία καθαρισμού.
4. Σκουπίστε με ένα στεγνό και καθαρό πανί.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση από άλλους χρήστες. Πριν από την επαναχρησιμοποίηση από άλλους, το προϊόν πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί σωστά και να ελεγχθεί από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ:

Μην πετάτε το προϊόν στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε εκ των προτέρων από την τοπική σας αρχή τον σωστό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο για να το απορρίψετε.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος που αφορά το προϊόν, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή αυτού του προϊόντος στη διεύθυνση mobiakcarequality@mobiak.com.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/745 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Οι τρύπες για να στερεωθεί στον τοίχο το επιτοίχιο καθίσμα μπάνιου 0805519 πρέπει να τοποθετούνται σε αντιστοιχία των κορυφών ορθογωνίου ύψους 70 mm και πλάτους 300 mm. Ανατρέξτε στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για περισσότερες πληροφορίες. Μέσα στην συσκευασία ΔΕΝ περιλαμβάνεται το σετ βιδών για τη στερέωση του προϊόντος στον τοίχο. Ο τύπος των βιδών που χρησιμοποιούνται αλλάζει σύμφωνα με το συγκεκριμένο υλικό του τοίχου του τελικού χρήστη. Η παροχή ενός γενικού σετ βιδών μπορεί να είναι επικίνδυνη εάν δεν είναι κατασκευασμένο για χρήση με τον συγκεκριμένο τοίχο. Ως εκ τούτου, ο τελικός χρήστης πρέπει από μόνος του να επιλέξει το κατάλληλο σετ βιδών, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου του μπάνιου.

EN

WALL-MOUNTED BATHROOM SEAT "PRIME" INTENDED USAGE:

The Wall-Mounted bathroom seat "PRIME" is meant to be used while showering, allowing the user to achieve greater independence, reducing muscle fatigue due to standing position as well as slip and injuries risks. The folding mechanism make these products suitable even for small bathrooms and help the user to keep the shower tray tidy and free from any obstacle without effort.

INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS:

The Wall-Mounted bathroom seat "PRIME" is aimed to elderly people, wheelchair users, people with reduced mobility of lumbar, knee or hip, and to all those who have difficulty to maintain the standing position during the shower stages of daily personal hygiene. The user is required to have autonomy of balance during the sitting and standing procedures as well as to have adequate ability to keep sitting. The wall seat must not be used if the user has problems related to balance or perception disorders.

SAFETY WARNING AND INDICATIONS:

- The maximum user weight indicated in the fitting instructions must not be exceed.
- Before every use, be sure the wall seat is correctly assembled.
- During assembly, strictly adhere to what is shown in the User Manual.
- The risk of finger injuries may increase during the mounting process.
- Do not modify the wall seat and its components in any way.
- Do not use the wall seat if damaged or altered in any way. Cracks and deformations may strongly affect the performances and safety of the device.
- After use, the wall seat should be folded in its non-use configuration.
- Do not use the wall seat for a different purpose from the intended one.
- The wall seat must not be stored outdoors.

MAINTENANCE INFO:

The products maintenance consists of the cleaning and sanitation procedures. In order to guarantee a safe use and adequate standard of hygiene, the user should perform these procedures before every use. The user has to make certain of the structural integrity of the device and its components. For cleaning and sanitation procedures, follow the steps below:

1. Gloves should be worn.
2. Remove the evident dirt before to proceed with the most accurate disinfection.
3. Use water or non aggressive detergent for the cleaning procedure.
4. Wipe with a dry and clean cloth.

REUSE REQUIREMENTS:

The product is suitable for reuse by other users. Before reuse by others, the product must be correctly cleaned and sanitized. Before the transfer of the product to others, the product must be checked by qualified dealers.

CORRECT DISPOSAL PROCEDURE:

Do not dispose of the product in the normal household waste. Ask your local authority beforehand for the correct and environmentally friendly way to dispose it.

INCIDENT REPORTING:









If there was a serious incident involving this device, contact the manufacturer of this product at mobiakcarequality@mobiak.com and the responsible authority in your country.

DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 2017/745 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

ATTENTION!



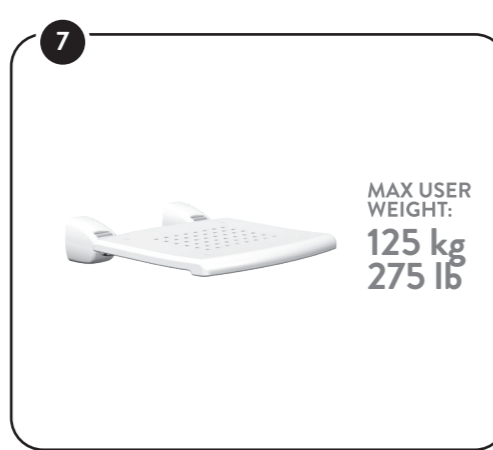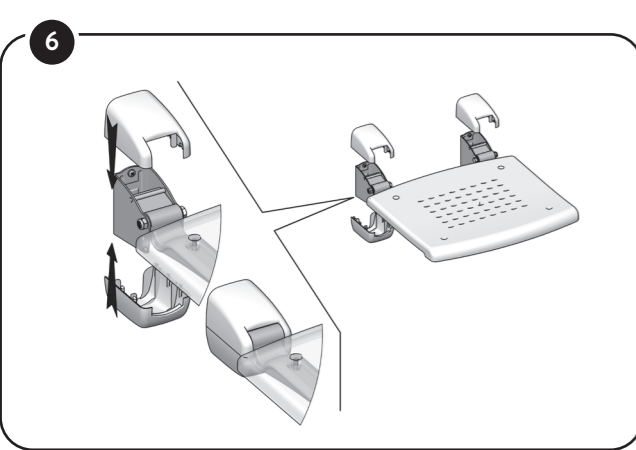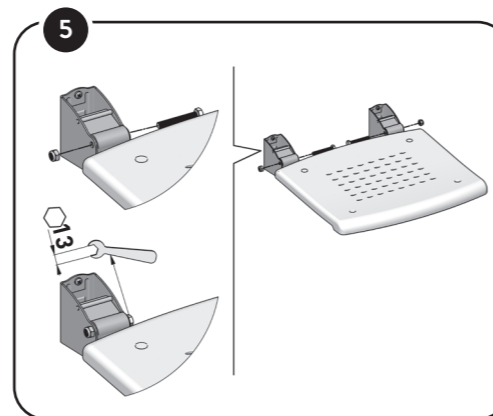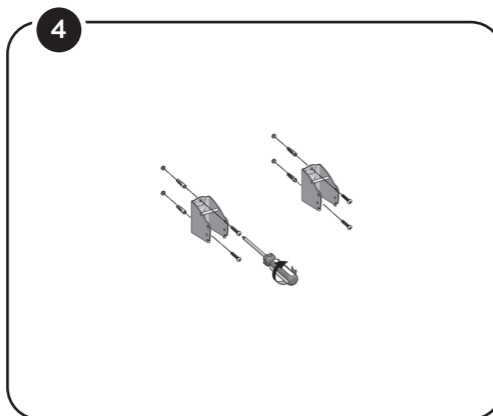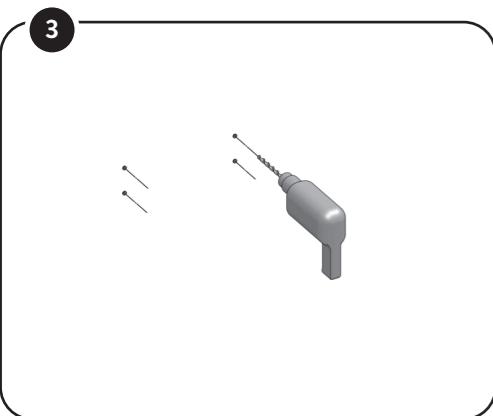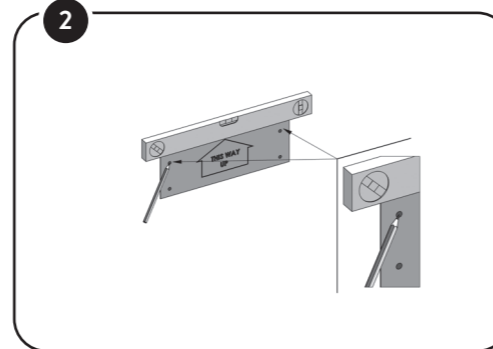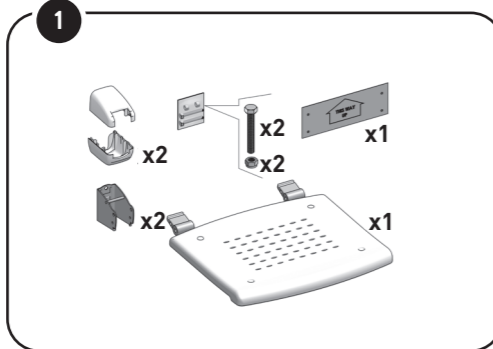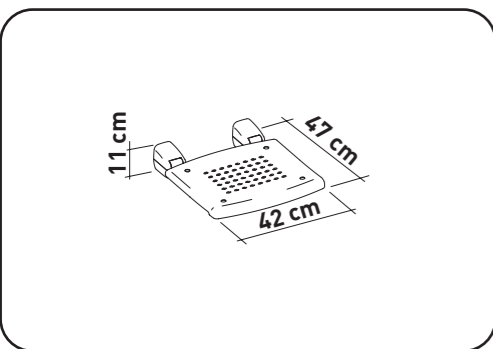















The holes for fixing the wall mounted seat 0805519 to the wall must be place in correspondence of the vertices of a rectangle of height 70 mm and width 300 mm. See the template included in the packaging for further information. Please note that the screws kit for fixing the product to the wall, is not included, the type of screws to be used changes according to the specific material of the wall of the final user. Providing a generic screws kit might be dangerous if it is not made to be used with the specific wall. Hence, the final user must provide themselves to choose the appropriate screws kit, according to the type of the wall of bathroom.



MAX USER WEIGHT:
125 kg
275 lb



Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος
Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Κατασκευαστής Manufacturer		Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark		Ύψος στοιβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date		Εύθραστο Fragile
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

