

GR EN

MOBIACARE[®]
MEDICAL EQUIPMENT



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:HAVĂ SALTEA IMPERMEABILĂ

MANUAL DE UTILIZARE:HOSA SALTEA IMPERMEABILĂ

REF:0806634

Utilizare prevăzută:

Husa pentru saltea creează o protecție impermeabilă pentru salteaua de pat.

Materialul husei este Nylon, care ofera durabilitate si protectie saltelei de lichide. Laturile sale impermeabile nu permit nici unei forme de umezeală să pătrundă în saltea.

Este un accesoriu de saltea și pat care este oferit separat.

Dimensiunea husei este de 200x90 si este potrivita pentru toata lumea saltele cu aceste dimensiuni si o grosime de pana la 15 cm.

Greutatea neta a husei impermeabile este: 142 gr.

Alte instructiuni:

1. Așezați salteaua în interiorul husei.
2. Folosiți fermoarul pentru a închide husa și fixați salteaua.
3. NU folosiți o saltea mai mare decât dimensiunea husei,

Întreținere și curățare:

- Se spală la 30-40°C în mână.
- Clorul este interzis.
- Nu curățați chimic
- Nu este permis uscătorul.
- Atârna-l pe o frânghie.
- Călcarea este interzisă.
- Dacă este necesar, puteți folosi o cârpă umedă și săpun blând în locurile care necesită curățare.
- Apoi uscați bine cu o cârpă uscată înainte de a utiliza din nou
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.



ATENȚIE (!):

- Dacă apare o problemă, NU utilizați produsul până când nu este reparat și contactați dealer autorizat și instruit
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă
- MOBIAK S.A. respinge orice responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau alte utilizări decât cele menționate în acest manual.
- MOVIAC SA își rezervă dreptul de a face modificări produsului și următorului manual fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii caracteristicilor acestuia.
- Există o posibilitate de abatere a dimensiunilor produselor din gama $\pm 3\%$.



PROTECȚIA MEDIULUI

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor municipale (acesta este și semnificația simbolului de reciclare indicat).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele de eliminare a produsului dumneavoastră pentru reciclare.
- 3) Aruncându-vă produsul acum inutil la punctul corect de reciclare, ajutați. În protecția mediului precum și în reexploatarea materialelor produsului dumneavoastră.

Declaratie de conformitate:

Declarăm pe propria noastră răspundere că Tehnologia Medicală menționată

Produsele din această declarație sunt de categorie de risc scăzut

(Clasa de risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European

745/2017 și, după caz, standardele și legislația menționate.

REPORT DE EVENIMENT:



Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

GARANTIE:

Produsul este garantat să funcționeze timp de un (1) an de la data achiziției.

Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU acoperă piesele de uzură și care se pot uza în timpul utilizării sau în timp.

Deteriorări sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (acolo unde este prevăzut), companiile de transport de asemenea nu sunt acoperite de garanție.

Formular de garanție

Detalii cumpărător

Numele complet:..... Data
cumpararii:.....S/N..... Lot:
.....Telefon:

Detalii magazin

Nume:..... Adresa:
..... Telefon:
.....

Ștampila magazinului



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Utilizare prevăzută:

Husa de saltea creează o protecție impermeabilă pentru salteaua de pat. Materialul husei este Nylon, care oferă durabilitate și protecție salteaua din lichide. Laturile sale impermeabile nu permit nicio formă de umiditatea să pătrundă în saltea.

Husa este un accesoriu pentru salteaua și patul care sunt oferite separat.

Dimensiunea Husei este de 200x90 și este potrivită pentru toate saltelele cu aceste dimensiuni și grosime de până la 15 cm.

Greutatea netă a husei Waterproof este: 142gr.

Instructiuni suplimentare:

- Așezați salteaua în interiorul husei.
- Folosiți fermoarul pentru a închide husa și a fixa salteaua.
- NU folosiți o saltea mai mare decât dimensiunea husei

Întreținere și curățare:

- Se spală manual la 30-40 °C.
- Fără clor.
- Nr. curățătorie chimică.
- Fără uscător.
- Uscați-l pe un cuier.
- Fără călcare.
- Dacă este necesar, puteți folosi o cârpă și un săpun delicat în zonele unde este necesar curățenie.
- Apoi uscați bine cu o cârpă uscată înainte de a o folosi din nou
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.

ATENȚIE (!):

- În caz de deteriorare sau defecțiune a produsului dumneavoastră NU îl utilizați produs și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul într-un scop care nu este indicat în acest manual
- MOBIAC SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate de la o utilizare incorectă a acestui produs și de la modificarea neautorizată a cadrul produsului.
- MOBIAC SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acesta acest document fără notificare prealabilă
- Există un $\pm 3\%$. Abatere pentru dimensiunile produselor.



Protecția mediului:

Dacă într-o zi vei constata că produsul tău trebuie înlocuit sau nu mai lucrează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa despre Centre de reciclare în care produsul dumneavoastră trebuie aruncat.
- 3) Eliminarea corectă a produsului ajută la protejarea mediu precum și reciclarea componentelor produselor.

Declaratie de conformitate:

Suntem singurii responsabili pentru declararea că Dispozitivele medicale menționate în această declarație sunt de clasa cu risc scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente a statului membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

GARANTIE:

Produsul este garantat pe o perioada de un (1) an de la data achizitionarii.

Garanția acoperă defectele din fabrică și **NU** acoperă daunele rezultate din utilizarea greșită, întreținerea defectuoasă, modificarea, suprasolicitarea sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare ale produsului. Asemenea **NU** acoperiți piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp.

Daune sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de aprovizionare (unde este cazul), transportatorii nu sunt acoperiți de garanție.

Formular de cerere de garanție

Datele Cumpărătorilor

Nume:..... **Data achiziției:**
..... **S/N**.....

Lot:..... **Telefon:**

Datele distribuitorilor

Nume:
.....

Adresa:..... **Telefon:**
.....

Ștampila reseller



MOBIAC S.A.

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ










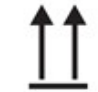



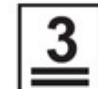




KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	<p>Ιατρική Συσκευή Medical Device</p>		<p>Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark</p>
	<p>Κατασκευαστής Manufacturer</p>		<p>Ημερομηνία Παραγωγής Production Date</p>
	<p>Κωδικός Προϊόντος Product Number</p>		<p>Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use</p>
	<p>Σειριακός Αριθμός Serial Number</p>		<p>Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage</p>
	<p>Αριθμός Παρτίδας Batch Number</p>		<p>Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up</p>
	<p>Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification</p>		<p>Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight</p>
	<p>Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry</p>		<p>Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height</p>
	<p>Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care</p>		<p>Εύθραυστο Fragile</p>
	<p>Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only</p>		<p>Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive</p>