

**UTILIZARE PREVENTATĂ:**

Sina pliabilă cu cârlige este un dispozitiv conceput pentru a preveni căderea accidentală a unei persoane din orice pat de spital sau de îngrijire la domiciliu.

Potrivit pentru cele mai multe paturi metalice și cu un sistem de manipulare ușor, astfel încât nu trebuie să fie îndepărtate complet pentru a transfera pacientul în și din pat. Sunt concepute pentru a se potrivi majorității patului datorită cadrului simplu, care poate fi amplasat la tăblia patului și la picioarele patului.

**ATENȚIE(!)**

- În cazul unei probleme NU utilizați produsul până când nu este reparat și contactați reprezentantul autorizat și instruit
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă.
- MOBIAC S.A. își declină orice răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau alte utilizări decât cele menționate în acest manual.
- MOBIAC S.A. își rezervă dreptul de a face modificări produsului și următorului manual fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii caracteristicilor acestuia.
- Există o posibilitate de abatere a dimensiunilor produselor în ±3%.

**AVERTISMENTĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ:**

- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil decât dacă ați citit mai întâi și înțelegeți pe deplin acest manual de utilizare.

Dacă nu reușiți să înțelegeți avertismentele, precauțiile sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, dealer sau personal tehnic înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar se pot produce vătămări sau deteriorări.

- Păstrați produsul departe de surse de căldură.
- Vă rugăm să păstrați acest formular pentru utilizare ulterioară.
- Aveți grijă când sunt copii în preajmă și NU lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Nu depășiți sarcina utilă maximă.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrelor și răni.
- Nu încercați să ridicați produsul de nicio piesă de asamblare.
- Nu utilizați produsul în alt scop decât cel prevăzut.
- Balustradele nu sunt destinate să suporte toată greutatea unei persoane.

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:**

Declarăm pe propria noastră răspundere că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Categoria de Risc scăzut (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația menționate.

**ÎNAINTE DE UTILIZARE:**

- Verificați dacă cadrul este deteriorat pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului. Nu există fisuri sau rupturi în cadru,
- În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt sigure și strânse.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului pentru persoane și obiecte.

**PROTECȚIA MEDIULUI:**

Dacă descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu alte deșeuri municipale (acesta este semnificația simbolului de reciclare).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele în care puteți lăsa produsul pentru reciclare.
- 3) Aruncând produsul dvs. care nu mai este util la punctul corect de reciclare, contribuiți la protejarea mediului, precum și la reutilizarea materialelor produsului dumneavoastră..

**INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEZINFECTIE:**

Pentru a asigura o utilizare în siguranță și un nivel adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

Utilizatorul trebuie să asigure integritatea structurală a produsului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și dezinfectie, urmați pașii de mai jos:

1. Trebuie să purtați mănuși.
2. Îndepărtați murdăria vizibilă înainte de a trece la o dezinfectie mai aprofundată.
3. Utilizați apă sau detergent slab pentru procesul de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
5. NU lăsați produsul umed.
6. Nu folosiți substanțe de curățare chimice pentru a curăța cadrul. Acest lucru poate provoca deteriorarea suprafeței de acoperire a produsului.
7. Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
8. Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături.
9. Lubrifiere: produsul este conceput pentru întreținere minimă. Cu toate acestea, verificați la fiecare șase luni de lubrifiere a pieselor mobile-mecanice, aceasta va asigura o durabilitate optimă.

**UTILIZARE PREVENTATĂ:**

Sina de noptieră este un accesoriu conceput pentru a preveni căderea accidentală a unei persoane din orice pat de spital sau de îngrijire la domiciliu.

Potrivit pentru cele mai multe paturi metalice și cu sistem de control ușor, astfel încât nu trebuie să fie complet îndepărtat pentru transportul pacientului la și de la pat. Sinele de noptieră sunt concepute pentru a se potrivi în majoritatea patului datorită cadrului său simplu, care poate fi amplasat pe tăblia patului și pe tăblia patului.

**AVERTISMENT (!)**

- În caz de deteriorare sau defecțiune a produsului dumneavoastră NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul într-un scop care nu este indicat în acest manual.
- MOBIAC SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate dintr-o utilizare incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIAC SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă.
- Există un ± 3%. Abatere pentru dimensiunile produselor.

**AVERTISMENTĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ:**

- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă. Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau măsurile de precauție, vă rugăm să contactați distribuitorul sau persoana tehnică adecvată înainte de a utiliza produsul, deoarece se pot produce daune.
- Păstrați produsul departe de surse de căldură.
- Salvați acest document pentru referințe viitoare.
- Aveți grijă când copiii sunt în apropiere și nu permiteți copiilor să se joace cu produsul.
- Nu depășiți sarcina utilă maximă.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrelor și rănirea.
- Nu încercați să ridicați produsul cu ajutorul niciunei părți detașabile.
- Nu utilizați scaunul pentru produs în alt scop decât cel prevăzut.
- Barele de noptieră nu sunt destinate să suporte întreaga greutate a unei persoane.

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:**

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

**ÎNAINTE DE UTILIZARE:**

- Verificați dacă cadrul este deteriorat pentru a garanta utilizarea în siguranță a produsului. (Nu există fisuri sau fracturi în cadru).
- În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați dealerul pentru instrucțiuni suplimentare.
- Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt sigure și bine înșurubate.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în siguranță absolută a produsului pentru persoane și obiecte.

**PROTECȚIA MEDIULUI:**

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare în care trebuie aruncat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului contribuie la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

**INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEZINFECTIE:**

Pentru a garanta o utilizare în siguranță și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

Utilizatorul trebuie să asigure integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați pașii de mai jos:

1. Trebuie purtate mănuși.
2. Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a continua cu cea mai precisă dezinfectie.
3. Utilizați apă sau detergent ușor pentru procedura de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
5. NU lăsați produsul umed.
6. Nu folosiți substanțe de curățare chimice pentru a curăța cadrul. Acest lucru ar putea cauza deteriorarea suprafeței produsului.
7. Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
8. Protejați articolul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.
9. Lubrifiere: produsul a fost proiectat pentru întreținere minimă; Cu toate acestea, verificați lubrifierea pieselor mobile și mecanice la fiecare șase luni, acest lucru ar asigura o durată optimă.

**MONTAJ:**


NOTĂ: Ilustrațiile de asamblare sunt orientative pentru a ușura asamblarea și pot diferi de realitate.

Produsul se livrează asamblat și gata de utilizare.

Pentru a pune șinele pe pat:

- Așezați cârligele pe o parte a patului pe partea verticală a patului, de ex.
- De la capătul opus pe aceeași parte, pe suportul pentru picioare, extindeți cele două cârlige la cârlig.

**RAPORT DE INCIDENT:** Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

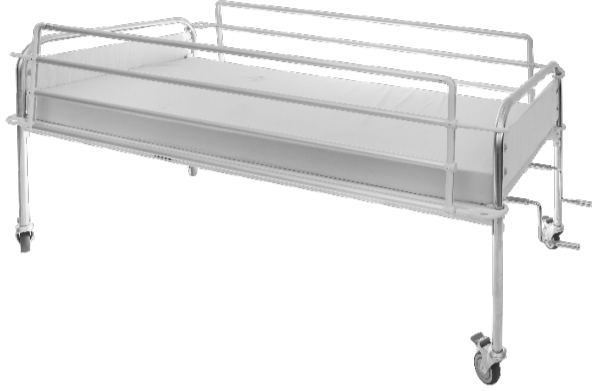**GARANȚIE**

Primul data achiziției.  
Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU acoperă piesele consumabile și orice se poate uza în timpul utilizării sau în timp.

De asemenea, nu sunt acoperite de garanție daunele sau defectele cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (unde este cazul), companii de transport.

Nicio lucrare sau piese de schimb nu sunt acoperite decât dacă au fost verificate de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru testare sunt plătite de utilizator sau client sau de magazinul cu amănuntul.

**GARANȚIE:**

Produsul este garantat pe o perioadă de un (1) an de la data achiziției.

Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU SE aplică daunelor rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU SE APLICĂ pe piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp. Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (unde este cazul) și transportatorii nu sunt acoperite de garanție.

Nu se aplică niciun service sau piesă de schimb decât dacă a fost inspectată de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru mărfurile aflate în garanție trebuie plătite de utilizatorul final-client sau de dealer.

**ASAMBLARE:**

NOTĂ: Ilustrațiile pentru asamblare sunt orientative pentru a ușura asamblarea. Pot exista diferențe față de realitate.

Produsul este asamblat și gata de utilizare.

Pentru a asambla șinele pe pat:

- Așezați cârligele pe o parte a patului pe partea verticală a patului, de ex.
- De la capătul opus de pe aceeași parte, de exemplu pe suport pentru picioare, extindeți cele două cârlige astfel încât să poată fi agățate de cadru.

**RAPORTAREA INCIDENTELOR:** Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente a statului membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.



MBK COD	GTIN-14	RO DESCRIERE	RO DESCRIERE
0809254	05213006904233	Balustradă CU CÂRLIGE Pliabil	SINE EXTERIOARE - REGLABIL CU 4 CÂLIGE




**MOBIAK**<sup>®</sup>  
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

**FORMUL DE GARANȚIE:**




DETALII CUMPARATOR:	
NUMELE COMPLET	
NUME:	
DATA CUMPĂRĂRII CUMPĂRARE	
DATA:	
TELEFON /	
TELEFON:	
LOTUL:	
DETALII DEALER	
NUME MARCA /	
NUMELE COMPLET:	
ADRESĂ /	
ADRESA:	
TELEFON /	
TELEFON:	
SIGILUL ȘI SEMNĂTURA MAGAZIN / SEMNĂTURA ȘI SEMNĂTURA	

Interpretarea simbolurilor găsite pe eticheta de pe cutie sau & în instrucțiunile de utilizare ale produsului

Descrierea simbolurilor care au fost imprimate pe etichetă, cutie principală și/sau manual de utilizare

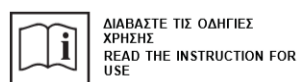

REF : 0809254

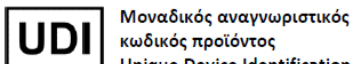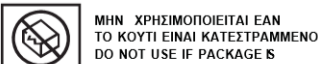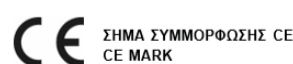

MOBIAK S.A  
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ  
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE  
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiacare.com

