

UTILIZARE PREVENTATĂ:

Walker-urile pot fi folosite de persoanele cu mobilitate redusă pentru a intra și a ieși din casă

ATENȚIE(!):

- Dacă apare o problemă, NU utilizați produsul până când nu este reparat și contactați dealerul dumneavoastră autorizat și instruit
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă
- MOBIAK S.A. respinge orice responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau alte utilizări decât cele menționate în acest manual.
- MOVIK SA își rezervă dreptul de a aduce modificări produsului și următorului manual fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii caracteristicilor acestuia.
- Există o posibilitate de abatere a dimensiunilor produselor în intervalul de ±3%.

AVERTISMENTĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ:

- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil decât dacă ați citit mai întâi și ați înțeles pe deplin acest manual de utilizare.

Dacă nu reușiți să înțelegeți avertismentele, avertismentele sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, dealer sau personal tehnic înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar se pot produce vătămări sau deteriorări.

- Păstrați produsul departe de sursele de căldură.
- Păstrați acest formular pentru referințe viitoare.
- Aveți grijă când sunt copii în preajmă și NU lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Nu depășiți toleranța maximă de sarcină.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrelor și rănirea
- Nu încercați să ridicați produsul de nicio piesă de asamblare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Declarăm pe propria noastră răspundere că Produsele de Tehnologie Medicală menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc scăzută (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația menționate.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

- Verificați dacă cadrul este deteriorat pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului. Nu există fisuri sau rupturi în cadru,
- În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați distribuitorul autorizat și instruit
- Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt sigure și bine strânse.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor pentru a asigura utilizarea absolut sigură a produsului pentru persoane și obiecte.
- Walker-ul este complet extins și blocat în această poziție.
- Roțile (dacă sunt echipate) sunt bine fixate.
- Mânerele sunt la aceeași înălțime

**PROTECȚIA MEDIULUI:**

Dacă descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor municipale (acesta este și semnificația simbolului de reciclare indicat).
- 2) Contactați autoritatea municipală pentru a indica punctele de eliminare a produsului dumneavoastră pentru reciclare.
- 3) Aruncând produsul dvs. care nu mai este utilizabil la punctul de reciclare corect, contribuiți la protejarea mediului, precum și la reutilizarea materialelor produsului dvs..

INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE:

Pentru a asigura o utilizare în siguranță și un nivel adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

Utilizatorul trebuie să asigure integritatea structurală a produsului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și dezinfectie, urmați pașii de mai jos:

1. Trebuie să purtați mănuși.
2. Îndepărtați impuritățile vizibile înainte de a trece la o dezinfectie mai aprofundată.
3. Utilizați apă sau detergent slab pentru procesul de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
5. NU lăsați produsul umed.
6. Nu folosiți substanțe de curățare chimice pentru a curăța cadrul. Acest lucru poate provoca deteriorarea suprafeței de acoperire a produsului.
7. Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
8. Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături.

UTILIZARE PREVENTATĂ:

Walker-urile pot fi folosite de persoane cu mobilitate redusă pentru călătorii în interiorul și în afara casei.

ATENȚIE (!):

- În caz de deteriorare sau defecțiune a produsului dumneavoastră NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul într-un scop care nu este indicat în acest manual
- MOBIK SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate dintr-o utilizare incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIK SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără notificare prealabilă
- Există un ± 3%. Abatere pentru dimensiunile produselor.

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ:

- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă. Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau măsurile de precauție, vă rugăm să contactați dealerul sau persoana tehnică adecvată înainte de a utiliza produsul, deoarece pot fi cauzate daune.

- Păstrați produsul departe de sursele de căldură.
- Salvați acest document pentru referințe viitoare.
- Aveți grijă când copiii sunt în apropiere și nu permiteți copiilor să se joace cu produsul.

- Nu depășiți sarcina utilă maximă.
- Este întotdeauna necesară o atenție specială acolo unde există părți în mișcare care pot cauza blocarea membrelor și rănirea.
- Nu încercați să ridicați produsul cu ajutorul niciunei părți detașabile.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru a declara că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt de Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

- Verificați dacă cadrul este deteriorat pentru a garanta o utilizare în siguranță a produsului. (Nu există fisuri sau fracturi în cadru).
- În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați dealerul pentru instrucțiuni suplimentare.
- Verificați dacă produsul este asamblat corect și toate șuruburile sunt sigure și bine înșurubate.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor pentru a asigura utilizarea în siguranță absolută a produsului pentru persoane și obiecte.
- Walker-ul este în extensie completă și este blocat în această poziție.
- Roțile (dacă sunt disponibile) sunt bine fixate.
- Mânerele sunt la aceeași înălțime.

**PROTECȚIA MEDIULUI:**

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dvs. trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dvs., luați în considerare protejarea mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (acesta este și semnificația semnelui de reciclare afișat).
- 2) Contactați autoritățile publice și acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare în care trebuie aruncat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului contribuie la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

INFORMAȚII DE ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE:

Pentru a garanta o utilizare în siguranță și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați pașii de mai jos:

1. Trebuie purtate mănuși.
2. Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a continua cu cea mai precisă dezinfectie.
3. Utilizați apă sau detergent ușor pentru procedura de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
5. NU lăsați produsul umed.
6. Nu folosiți substanțe de curățare chimice pentru a curăța cadrul. Acest lucru ar putea cauza deteriorarea suprafeței produsului
7. Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor
8. Protejați articolul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.

MONTAJ:

Walker-urile sunt livrate asamblate și gata de utilizare

ALTE INSTRUCȚIUNI:

1. Pentru a plia sau desface premergătorul, utilizați mânerul sau butonul (dacă există în dotare).
2. Când utilizați premergătorul, trebuie să apăsați mânerul în jos, astfel încât premergătorul să rămână nemișcat și să nu alunece.
3. Când utilizați premergătorul trebuie să vă sprijiniți de ambele mâner în mod egal. Sprijinul cu o singură mână (și fără însoțitor) poate provoca deteriorarea mânerului.
4. **PENTRU PRODUS 0808819** :Spre deosebire de plimbătorii obișnuiți unde utilizatorul le împinge, premergătorul funcționează invers, utilizatorul îl trage.

CARACTERISTICI TEHNICE

1. Cadru din aluminiu.
2. Pliabil.
3. Înălțime reglabila.

GARANTIE:

Produsul este garantat să funcționeze timp de doi (2) ani de la data achiziției. Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, abuz sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU acoperă piesele de uzură și care se pot uza în timpul utilizării sau în timp.

Deteriorări sau defecte cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (acolo unde este prevăzut), companiile de transport de asemenea nu sunt acoperite de garanție.

Nicio lucrare sau piese nu sunt acoperite decât dacă au fost inspectate de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru inspecție sunt plătite de către utilizator sau client sau de către comerciant.

GARANTIE:

Produsul este garantat pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziției. Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU se aplică daunelor rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectare a instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU SE APLICĂ pe piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp. Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (unde este cazul) și transportatorii nu sunt acoperite de garanție. Nu se aplică niciun service sau piesă de schimb decât dacă a fost inspectată de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru mărfurile aflate în garanție trebuie plătite de utilizatorul final-client sau de dealer.

ASAMBLARE:

Walker-urile sunt livrate asamblate și gata de utilizare.

INSTRUCTII SUPLIMENTARE:

1. Pentru a plia sau desface premergătorul, utilizați mânerul sau butonul (dacă este disponibil)
2. Când utilizați premergătorul pentru a sta în picioare sau în picioare, împingeți mânerul în jos, asigurându-vă că premergătorul va sta nemișcat și nu va aluneca.
3. Când ieșiți din premergător trebuie să te bazezi pe ambele mâner în mod egal. Aplecarea doar de un mâner (fără escortă) poate deteriora mânerul.
4. **PENTRU PRODUSUL 0808819**: Spre deosebire de premergătoarele obișnuite în care utilizatorul trebuie să le împingă, un premergător pentru copii lucrează opus, utilizatorul trebuie să îl tragă.

CARACTERISTICI TEHNICE

1. Cadru din aluminiu
2. Pliabil
3. Înălțime reglabila

0809360	56 cm	44,5 cm	45 cm	75-94 cm	115 Kg
0809396	54 cm	46 cm	47 cm	76-93 cm	115 Kg
0808819	56 cm	50,5 cm	67 cm	42-51 cm	75 Kg
0809786	58,5 cm	42,5 cm	47 cm	75-93 cm	136 Kg
0809787	52 cm	44,5 cm	47 cm	75-93 cm	136 Kg

REPORT DE EVENIMENT:

Orice incident grav apărut în legătură cu utilizarea dispozitivului ar trebui raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

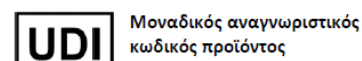
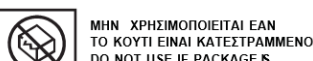
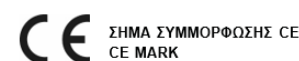
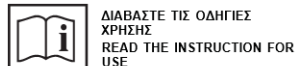
Orice incident grav care are loc în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

FORMUL DE GARANȚIE:

DETALII CUMPĂRĂTORI:	
NUMELE COMPLET	NUME:
DATA CUMPĂRĂRII	DATE:
TELEFON /	Telefon:
LOT SAU NUMĂR DE SERIE:	
DETALII DEALER	
NUME /	NUMELE COMPLET:
ADRESĂ /	ADRESA:
TELEFON /	Telefon:
SIGILUL ȘI SEMNĂTURA MAGAZIN / SEMNĂTURA ȘI SEMNĂTURA	

Interpretarea contribuțiilor găsite pe eticheta de pe cutie sau & în instrucțiunile de utilizare a produsului

Descrierea simbolurilor care au fost imprimate pe etichetă, cutie principală și/sau manual de utilizare

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: WALKER**

MANUAL DE UTILIZARE: WALKER

REF : 0809360, 0809396, 0808819, 0809786, 0809787

MOBIAK S.A
KATHIANA AKROTIRIOU, XANIA - KPTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

