



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: *ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ*

USER MANUAL: *HOSPITAL TYPE BED MANUAL 2-FUNCTIONS*



REF :0805424

CE

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Το κρεβάτι 0805424 χρησιμοποιείται για ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και χρειάζεται να μείνουν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι.

Είναι σχεδιασμένο για άτομα που πρέπει νοσηλευτούν για λόγους υγείας ή αναπηρίας σε οίκους ευγηρίας, νοσοκομειακά ιδρύματα ή και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης σχεδιάστηκε σαν άνετη λύση για την κατ' οίκον περίθαλψη ανθρώπων που χρειάζονται φροντίδα. Σκοπός του είναι να υποστηρίξει αυτή την περίθαλψη.





ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα **MHN** χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.
- Υπάρχει Πιθανότητα Απόκλισης των Διαστάσεων των Προϊόντων Εύρους $\pm 3\%$.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιονδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Εάν αδυνατείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή το τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- Να φυλάξετε το παρόν έντυπο για μελλοντική χρήση.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Να μην υπερβαίνετε το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
- Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή εκεί που υπάρχουν κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν παγίδευση των άκρων και τραυματισμούς
- Μην επιχειρήσετε να σηκώσετε το προϊόν από οποιοδήποτε συναρμολογούμενο μέρος.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

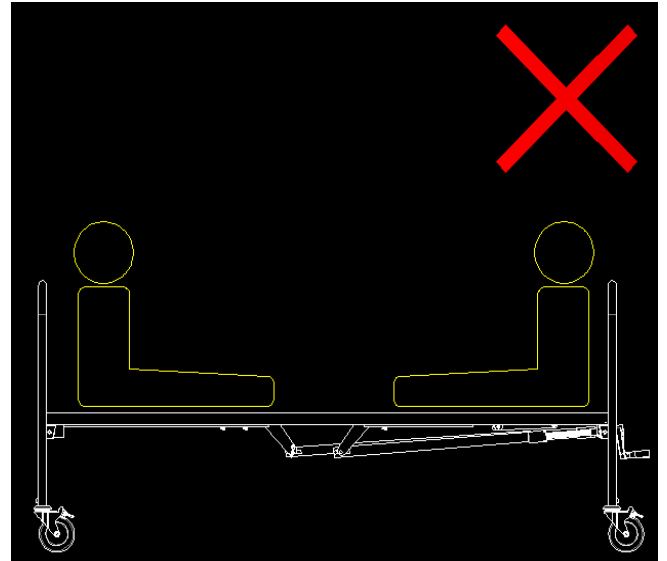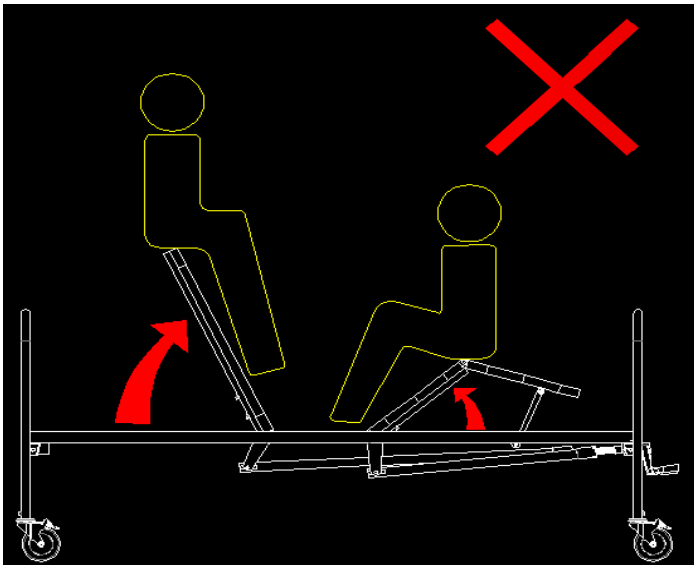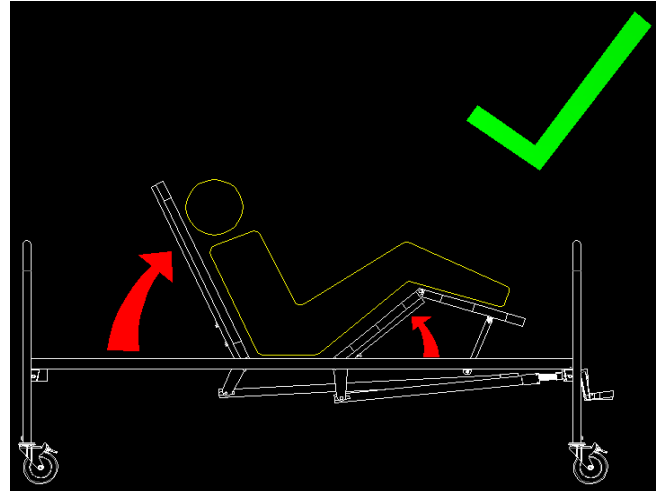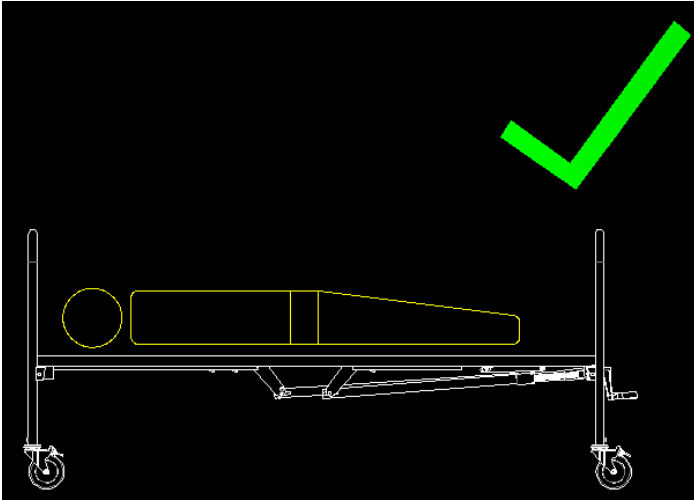

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα φορτίου για οποιονδήποτε λόγο.
- Όταν κατεβάζετε το κεφάλι ή το τμήμα του ποδιού, βεβαιωθείτε ότι κανένας δεν εισάγει χέρια, πόδια ή άλλα μέρη σώματος κάτω από τη βάση του κρεβατιού.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια δαπέδου που στηρίζει το κρεβάτι είναι επίπεδη

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:

1. Ελέγξτε εάν ο σκελετός έχει υποστεί ζημιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος. Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό,
2. Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
3. Ελέγξτε εάν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και όλες οι βίδες είναι ασφαλείς και καλά βιδωμένες.
4. Ελέγχετε πάντα την κατάσταση φθοράς των μηχανικών μερών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτα ασφαλής χρήση του προϊόντος για ανθρώπους και αντικείμενα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Χρησιμοποιήστε στρώματα ή αεροστρώματα σύμφωνα με την γνωμάτευση του Θεράποντος Ιατρού. Το μέγεθος του στρώματος να μην είναι μεγαλύτερο από αυτό του σκελετού το κρεβατιού. Όλα τα στρώματα και αεροστρώματα της MOBIAK είναι κατάλληλα για τα κρεβάτια.




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικονογραφήσεις για την συναρμολόγηση είναι ενδεικτικές για να κάνουν ευκολότερη την συναρμολόγηση ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές από την πραγματικότητα. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται εργαλεία για την συναρμολόγηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ
1	Κύριος Σκελετός κρεβατιού	1
2	Μανιβέλα ανύψωσης Πλάτης, (μέρος πάνω στο κρεβάτι)	1
3	Μανιβέλα ανύψωσης Ποδιών. (μέρος πάνω στο κρεβάτι)	1
4	Πλαστικά πλαίσια πλαϊνών (κεφαλάρι και υποπόδιο)	2
5	Βάση με τις ρόδες	2
6	Ζευγάρι Πτυσσόμενα Κάγκελα	1
7	Στατώ Ορού	1
KIT ΒΙΔΩΝ		
A	Βίδες για την Στερέωση των Κάγκελων.	4
B	Πείρος, μακρύς, και καρφίτσα για τη στερέωση της Μανιβέλας στο πλαίσιο του Κρεβατιού	2
C	Πείρος, κοντός, και καρφίτσα για τη στερέωση των υπομοχλίων στο τμήμα της πλάτης, που είναι στο πλαίσιο του Κρεβατιού	2




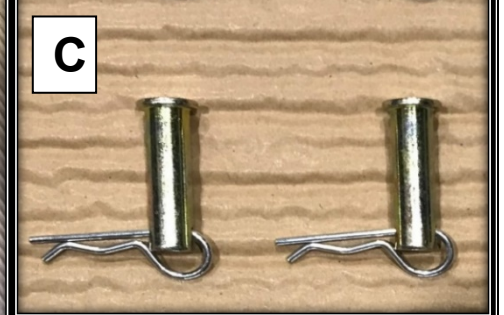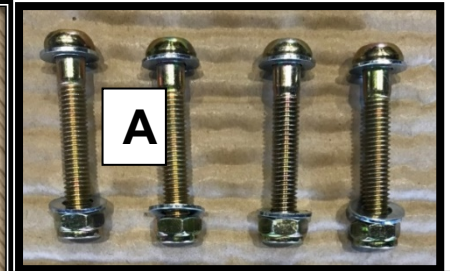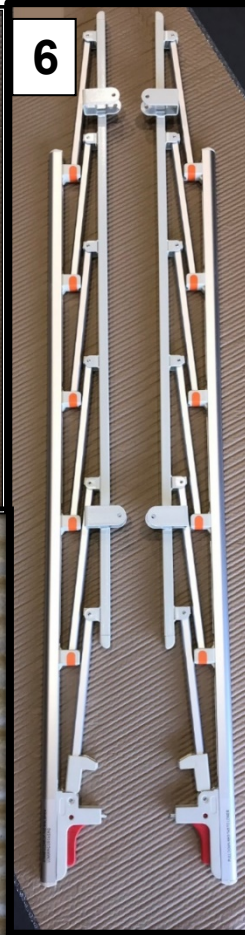

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

1. Ανοίξτε την συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα επιμέρους τμήματα του προϊόντος, εκτός από τον κύριο σκελετό, σε μία άκρη.
2. Ελέγξτε ότι το περιεχόμενο Συμφωνεί με την παραπάνω λίστα περιεχομένων.
3. Χωρίς να αφαιρέσετε τον Κύριο σκελετό από το χαρτοκιβώτιο, τοποθετήστε τη Βάση με τις ρόδες "5" στις υποδοχές του σκελετού
4. Πιέστε προς τα κάτω έτσι ώστε να εφαρμόσει το μέρος στην βάση.

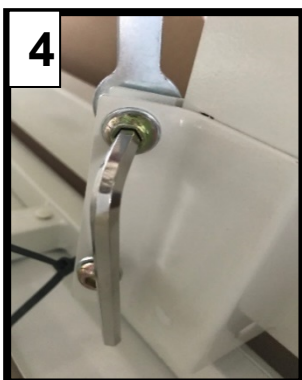

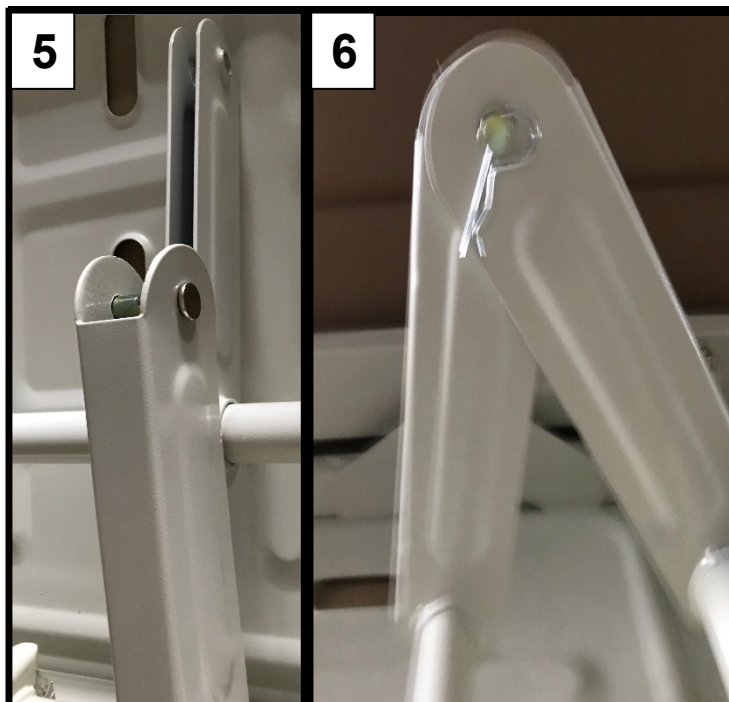

5



6




9



10



11

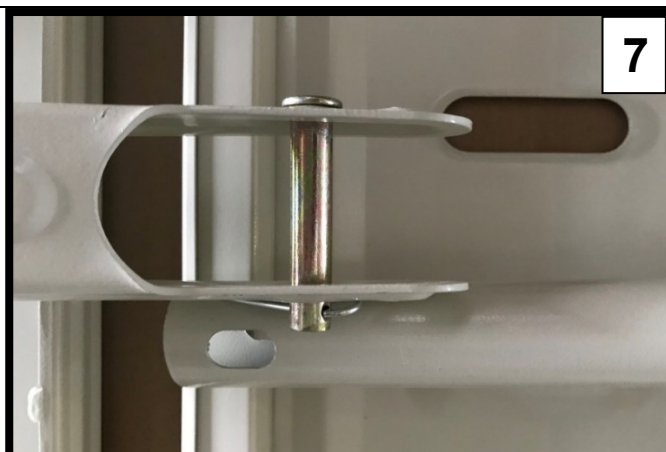

7



8

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

6. Τοποθετήστε τους κοντούς πείρους "C" για να ενώσουμε τα υπομόχλια στο τμήμα της πλάτης και ασφαλίστε. Όπως δείχνουν οι εικόνες: #5 έως #6

7. Ενώστε την μανιβέλα της πλάτης χρησιμοποιώντας τους πείρους "B", όπως τις εικόνες #7 & #8.

8. Ενώστε την μανιβέλα των ποδιών χρησιμοποιώντας τους πείρους "B", όπως τις εικόνες #9 & #10.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:




9. Χωρίς να αφαιρέσετε τα δεματικά, βγάλτε το κρεβάτι από την κούτα και γυρίστε το από την σωστή πλευρά.

10. Αφαιρέστε τα δεματικά και Περιστρέψτε τις λαβές της μανιβέλας "2" & "3" δεξιόστροφα για να σηκώσετε λίγο τα τμήματα, έτσι ώστε να τοποθετήσετε τα κάγκελα "6" ευκολότερα.

11. Τοποθετήστε τα κάγκελα "6" στο επιθυμητό ύψος με την λαβή ασφαλείας να είναι στην μεριά των ποδιών.

12. Βιδώστε και ασφαλίστε με τις βίδες "A" με τα εργαλεία που υπάρχουν στην συσκευασία.

Όπως δείχνουν οι εικόνες: #11 έως #15

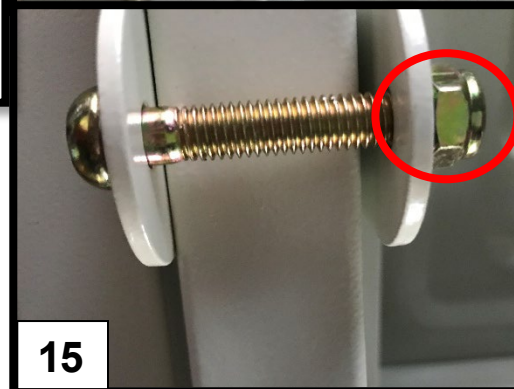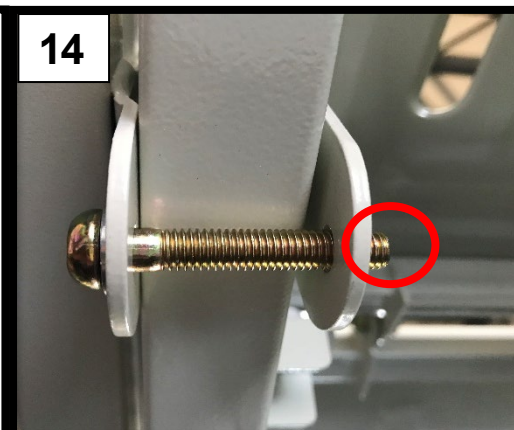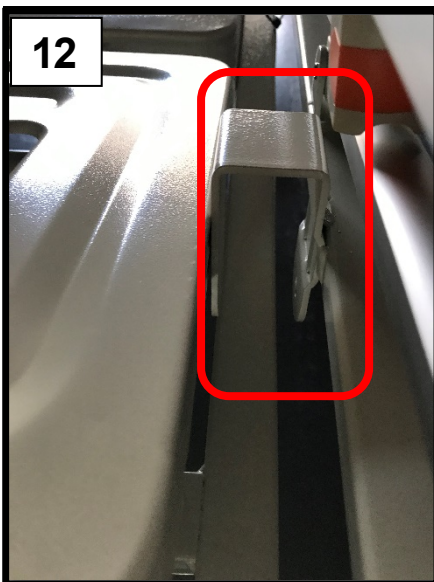

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

13. Τοποθετήστε τα Πλαστικά Πλαίσια πλαινών (κεφαλάρι και υποπόδιο) "4" στις ειδικές σιδερένιες υποδοχές του κρεβατιού που βρίσκονται στα αντίστοιχα τμήματα.

14. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω για να ασφαλισουν.

15. Βαλτέ την ασφάλεια.

Όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες: #16 έως #19

Το Κρεβάτι είναι συναρμολογημένο και έτοιμο για χρήση.



ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω με την αντίστροφη σειρά.

Ενεργοποίηση φρένου:
πατήστε το μοχλό ενεργοποίησης φρένου προς τα κάτω με το πόδι σας.



Απελευθερώνοντας φρένα:
πατήστε το μοχλό απενεργοποίησης φρένου προς τα κάτω με το πόδι σας.



ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ:

- Τραβήξτε τη λαβή προς τα έξω.
- Περιστρέψτε τη λαβή δεξιόστροφα για να σηκώσετε το τμήμα και αριστερόστροφα για να το χαμηλώσετε.
- Πέστε τη Λαβή προς τα μέσα αφού ρυθμίσετε την κλίση, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.
- Η αριστερήμανιβέλα ρυθμίζει την κλίση στο τμήμα της πλάτης και η δεξιάμανιβέλα στο τμήμα των ποδιών.

Όπως δείχνουν παρακάτω οι εικόνες: #20 έως #23

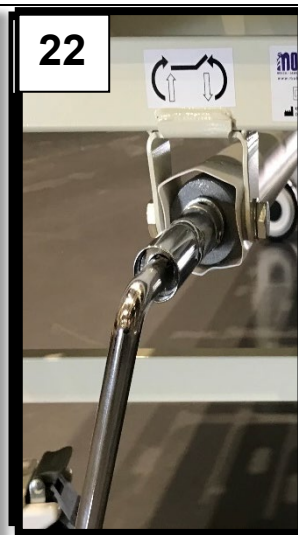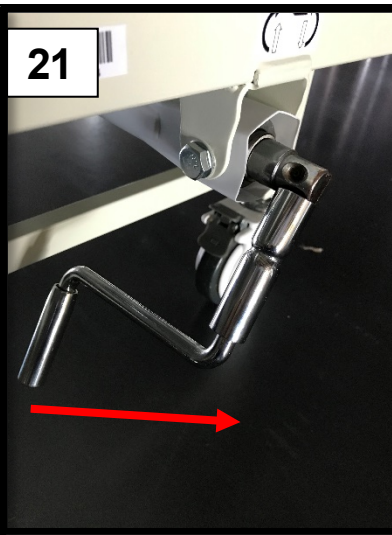

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ:

Τοποθετήστε το Στατώ ορού "7 που περιλαμβάνεται στην συσκευασία στις ειδικές υποδοχές που υπάρχουν στις άκρες του κρεβατιού.




Όπως δείχνουν οι εικόνες: #24 έως #25.

Για να τοποθετήσετε τον Αναρτήρα με πλαστική λαβή στο κρεβάτι***:

1. Πρέπει να προμηθευτείτε ξεχωριστά τον αναρτήρα 0805423 και την βάση 0805432.
2. Συναρμολογήστε τον αναρτήρα 0805423 που έρχεται σε τρία μέρη,
3. Βιδώστε την Βάση 0805432 στην ειδική υποδοχή του κρεβατιού, δεξιά ή αριστερά.
4. Περάστε τον αναρτήρα μέσα στον σωλήνα με τις εγκοπές για να στερεωθεί.

Όπως δείχνουν οι εικόνες: #26 έως #31

***** Μπορούμε να προσαρμόσουμε τη Βάση Αναρτήρα σε Κρεβάτι με ημερομηνία παραγωγής από 15 Μάρτιου 2021 και μετά.**

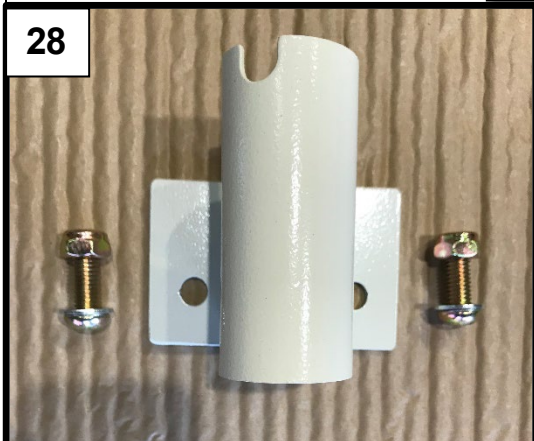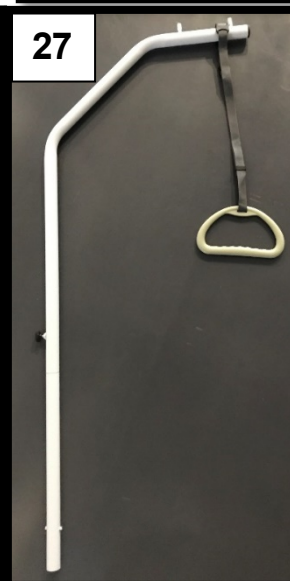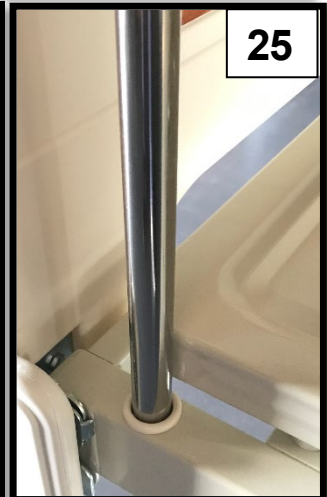

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καθαρισμό. Στη συνέχεια στεγνώστε καλά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του πλαισίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της επίστρωσης του κρεβατιού.

Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό
Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως την ταπετσαρία, ρόδες, φρένα, ξύλο ή πλαστικά μέρη και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασμα του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:			
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:		ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:			
LOT :			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ			
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ			

INTENDED USE:

The Bed 0805424 is used for patients who have health problems and they need to stay lying in bed. They are designed for people who need to be treated for health reasons or disability in nursing homes, hospitals or even in healthcare facilities.

It was also developed as a supporting solution for the home care.





CAUTION (!):

- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice
- There is a $\pm 3\%$. Deviation for the Dimensions of the Products.

GENERAL WARNINGS:

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this product or another available part. If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the product because may be caused damage.
- Keep away the product from heat sources.
- Save this document for future reference.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play with the product.
- Do not exceed the maximum payload.
- Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment and injury.
- Do not attempt to lift the product by any removable parts

PICTURES OF CORRECT AND WRONG USE OF THE PRODUCT:

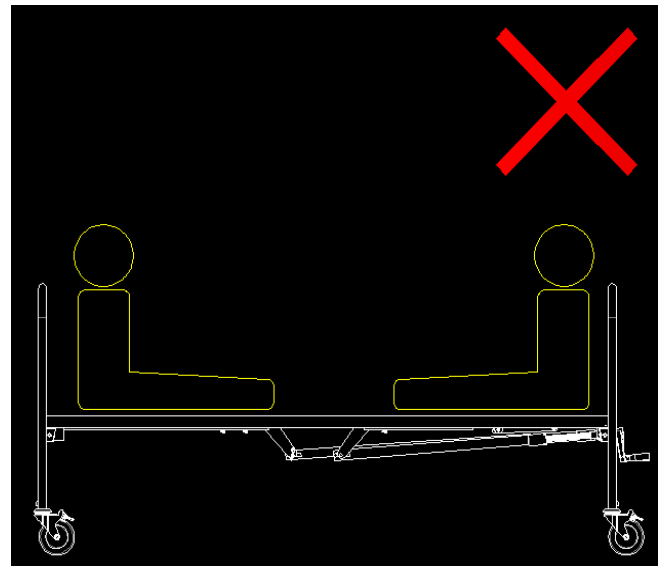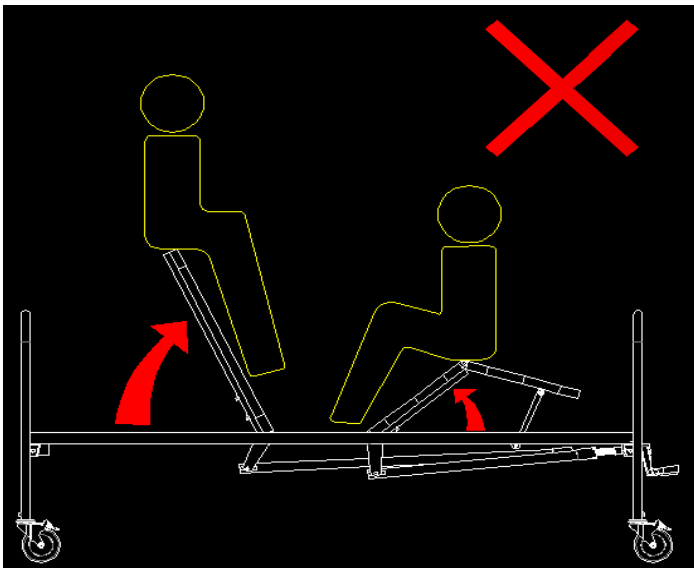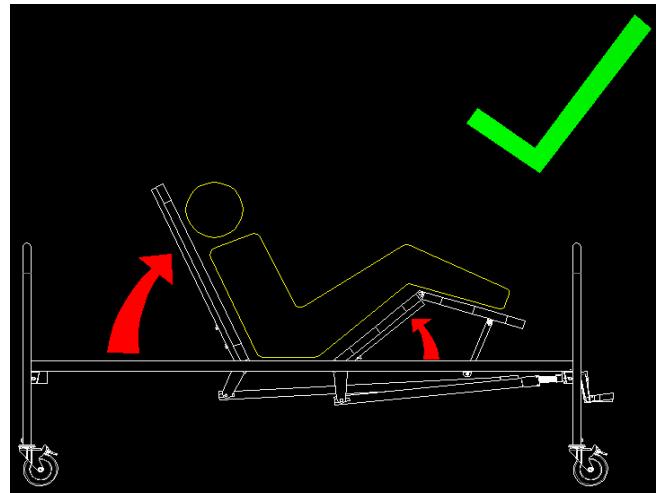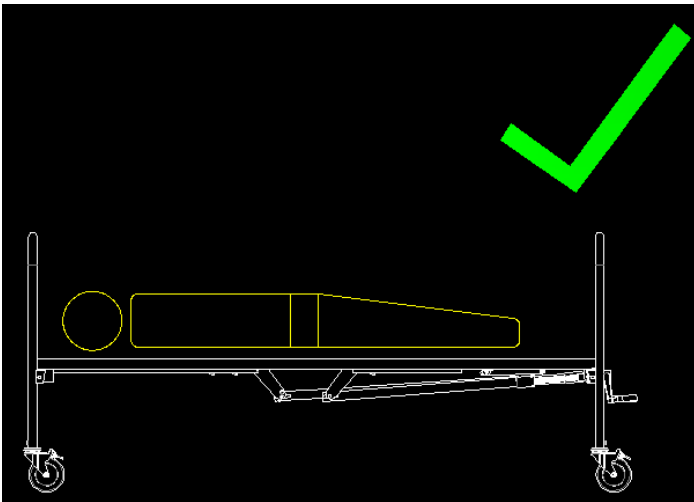

DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

PRECAUTIONS FOR USE

- Do not exceed the maximum load capacity for any reason.
- When lowering the head or foot section, make sure that nobody inserts hands, legs or other body parts under the bed base
- Make sure that the floor surface supporting the bed is flat.

BEFORE USE:

1. Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use of the product. (There are no cracks or fractures in the frame).
2. In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.
3. Check, if the product is properly assembled and all screws are secure and well screwed on.
4. Always check the condition of wear for the mechanical parts to ensure the absolute safe use of the product for people and objects

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

MATTRESS SELECTION

Use mattresses or anti-decubitus mattresses according to the prescription of the treating Physician. The size of the mattress should not be larger than the frame of the bed. All MOBIAK mattresses and anti-decubitus are suitable.



ASSEMBLING:

NOTE: The illustrations for the assembly are indicative to make the assembly easier. May will be differences from reality. Assembly tools are included in the package.

PACKAGE CONTENTS:

	DESCRIPTION	QTY
1	Main Bed Frame	1
2	Crank for Backrest, (part is already assembled on the bed)	1
3	Crank for Legrest (part is already assembled on the bed)	1
4	Plastic Side Boards (Headrest & Footrest)	2
5	The Base with the Wheels	2
6	Foldable Rails, pair	1
7	I.V Stand	1
SCREWS KIT		
A	Screws for Installing the Rails	4
B	Pins (Long) & split pins for fixing the Crank on the bed frame.	2
C	Pins (Short) & split pins for fixing the levers of the back section, in the Bed Frame.	2




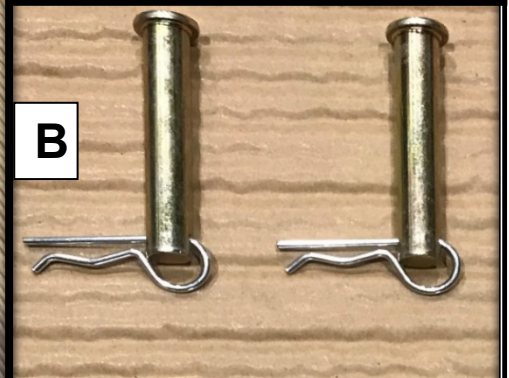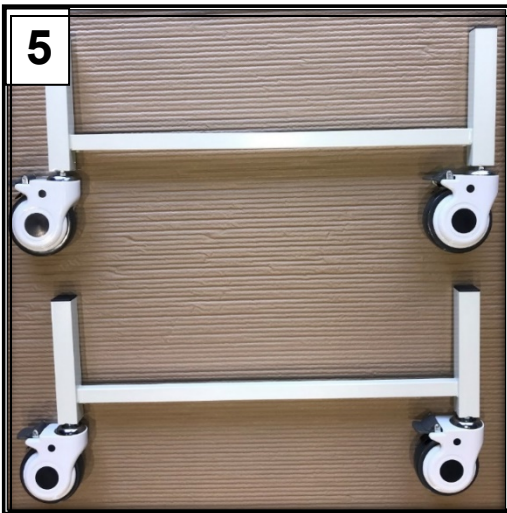


FOLLOW THE BELLOW STEPS:

6. Open the package and remove all parts of the product, except the main frame.
7. Check that the content Complies with the above content list.
8. Without removing the Main Frame from the carton, place the Base with the Wheels "5" in the frame slots.
9. Push down, so the part will fit in the frame slots.
10. Screw well with the tools that are in the package.

As the following picture show: # 1 to # 4

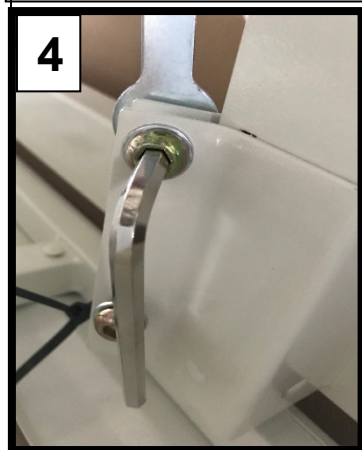

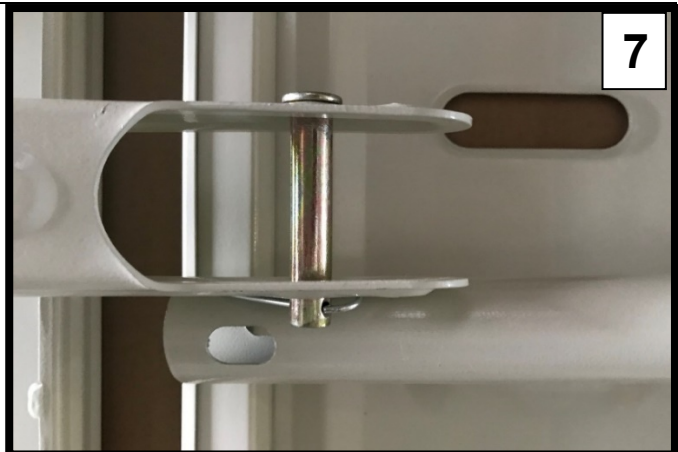

FOLLOW THE BELLOW STEPS:

6. Install the short pins "C" to join the levers on the backrest part and secure. **As the pictures # 5 to # 6 show**

7. Attach the crank for the Back-rest using the "B" pins, **As the pictures # 7 to # 8 show**

8. Attach the crank for the Leg-rest using the "B" pins, **As the pictures # 9 to # 10 show.**

FOLLOW THE BELLOW STEPS:




9. Without removing the tire-up take the bed out of the carton and turn it to the right side.

10. Remove the tire-up and rotate the crank handles "2" & "3" clockwise to raise the sections slightly so that the rails "6" care more easily installed.

11. Install the rails "6" at the desired height position, with the safety handle to be on the side of the legs.

12. Screw and secure the rails with the "A" screws with the tools included in the package.

As the pictures #11 to #15 shows

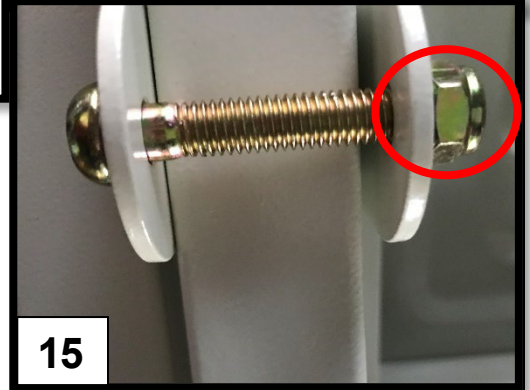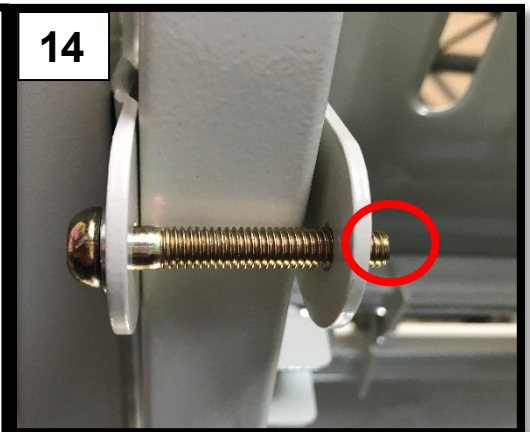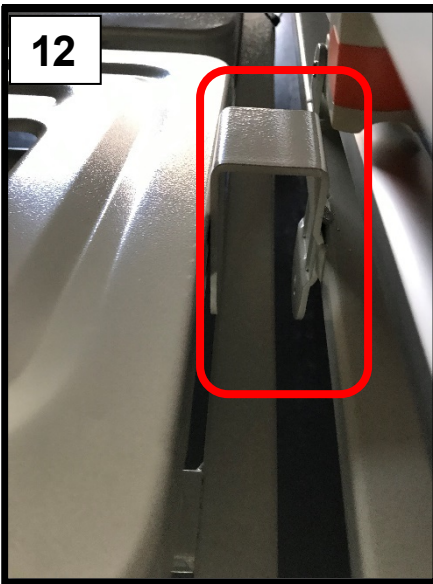

FOLLOW THE BELLOW STEPS:

13. Install the Plastic Side Boards (headboard and footrest) "4" in the special iron sockets of the bed..

14. Press lightly down to secure.

15. Put the safety lock.

As the pictures #16 to #19 shows

The Bed is assembled and ready for use.





DISASSEMBLY:

Follow the steps described above in reverse order.

Brake activation: push the brake activation lever down with your foot.


Brake deactivation: push the brake deactivation lever down with your foot.

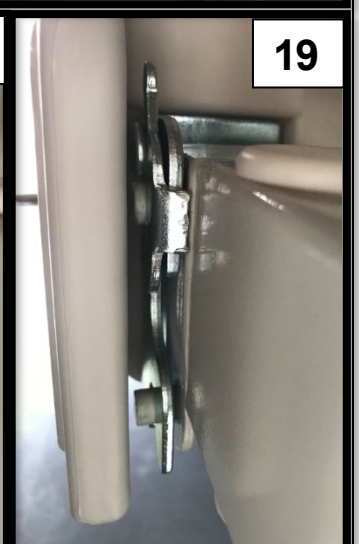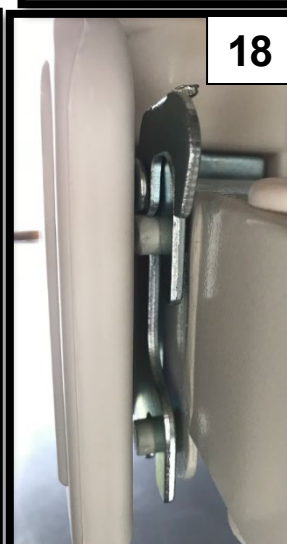

USE OF CRANK:

- v. Pull the handle out.
- vi. Rotate the handle clockwise to raise the section and counterclockwise to lower it
- vii. Tap the Handle inward after adjusting the slop to avoid any injuries.
- viii. The left crank adjusts the inclination in the back-rest and the right crank the leg-rest


As the pictures #20 to #23 shows.

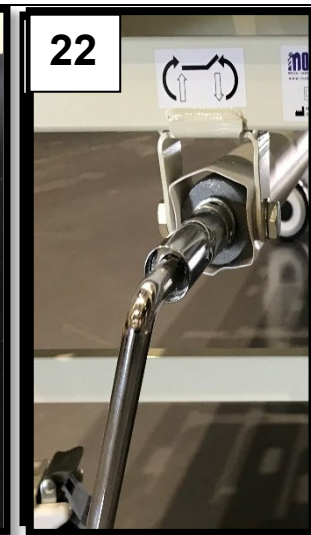

I.V STAND:

Insert the IV. Stand “7” that are in the package, into the special slots on the edge of the bed.

As the pictures #24 to #25 shows.



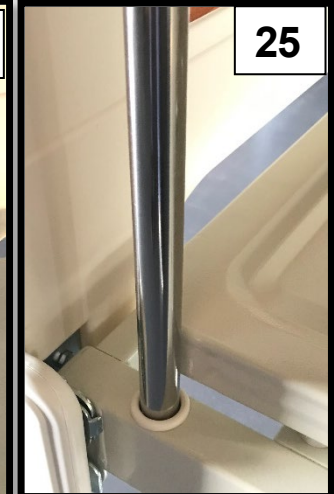


To place the Monkey Pole with plastic handle on the bed*:**

5. You must separately purchase the Monkey Pole 0805423 and Base 0805432.
6. Assemble the Monkey Pole 0805423 that comes in three parts.
7. Screw the Base 0805432 on the special bed socket that are on right or left.
8. Insert the Monkey pole 0805423 into the notched tube to stabilize it.

***** We can install the Monkey pole base 0805432 on beds with production date from March 15, 2021 and after.**

As the pictures #26 to #31 shows.

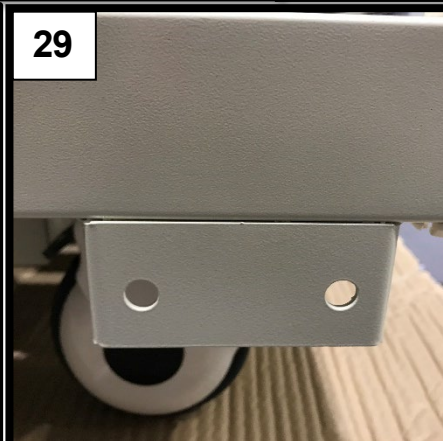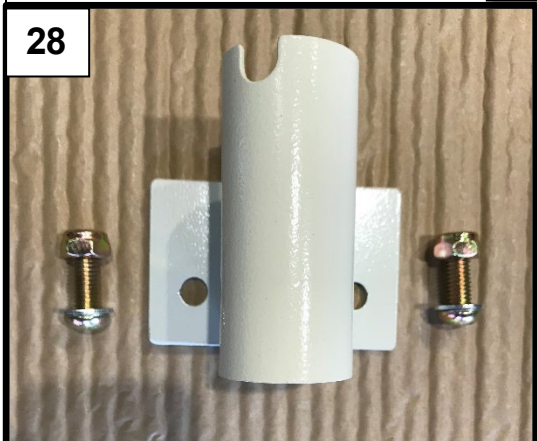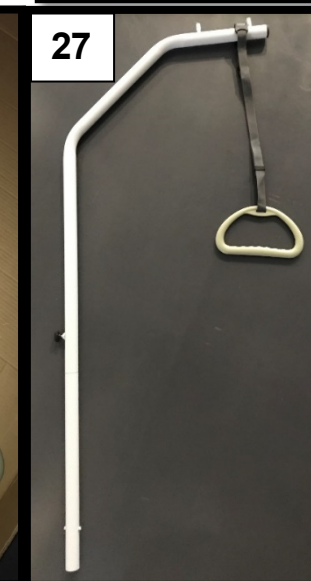

CLEANING AND DISINFECTION:

Use only a wet cloth and mild soap on surfaces where they need cleaning.

Then dry thoroughly before you use the product.

DO NOT leave the product wet.

Do not use chemical cleaners to clean the frame. This could cause damage to the surface.

If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.

Protect the item from scratches, cuts and punctures.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.

WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of two (2) years from the purchasing date.

The warranty covers factory defects & DOES NOT cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT cover the parts that can wear out during use or over time, like the upholstery, wheels, brakes, wood, or plastic parts.

Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable), carriers are not covered by the warranty

No service or spare part is covered unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the user-customer or by dealer.

WARRANTY FORM:

BUYERS DETAILS:			
FULL NAME:			
PURCHASING DATE:		PHONE:	
SERIAL NUMBER:			
LOT :			
DEALER DETAILS			
FULL NAME:			
DDRESS:			
PHONE:			
			SIGN AND SIGNATURE



MOBIAC S.A.
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ANNEX A. FEATURES AND SPECIFICATIONS

MBK CODE	GR DESCRIPTION	EN DESCRIPTION
0805424	ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ	HOSPITAL TYPE BED MANUAL 2-FUNCTIONS
0805423	ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	MONKEY POLE WITH HANDLE
0805432	ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΡΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ	MONKEY POLE BASE



















0805424

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	FULL LENGTH	208 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	FULL WIDE	92 cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	INTERNAL LENGTH	200 cm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	INTERNAL WIDE	89 cm
ΥΨΟΣ (ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ)	HEIGHT WITH WHEELS	50 cm
ΜΗΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	LENGTH FOR BACK PART	75 cm
ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	LENGTH FOR MIDDLE PART	59 cm
ΜΗΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ	LENGTH FOR LEG PART	54 cm
ΚΛΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ/ΛΑΤΗΣ	BACK TILTING	75° (+-5°)
ΚΛΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ	KNEE TILTING	40° (+-5°)
ΜΑΝΙΒΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	METAL CRANK	2 pcs
ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΙ & ΥΠΟΠΟΔΙΟ	HEAD-FOOT BOARD	2 pcs ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ / PLASTIC REMOVABLE
ΤΡΟΧΟΙ	WHEELS	5inch 4 pcs ΜΕ ΦΡΕΝΟ / W/ BRAKE
ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ	I.V STAND	ΝΑΙ / YES
***ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ & ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ / I.V STAND PREVISION IN THE FOUR CORNERS OF THE BED.		
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	URINE HOOKS	ΝΑΙ / YES
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	MAX LOAD	250 Kg
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	ITEM WEIGHT (NW)	75 Kg
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	GROSS WEIGHT	85 Kg
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	FRAME	ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ / STEEL
ΧΡΩΜΑ	COLOR	ΛΕΥΚΟ / WHITE
ΒΑΒΗ	PAINT	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / NORMAL TREATMENT
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ	CARTON DIMENTION FOR THE MAIN FRAME	202x95x19 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΑΙΝΩΝ	CARTON DIMENTION FOR PLASTIC SIDE BOARDS (HEADREST & FOOTREST)	96x55x13 cm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΣΥΜΒΟΛΑ
ANNEX B. SYMBOLS

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Υψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive