



GT3k

Ortopedie manuală pat de tracțiune

Cod de înregistrare: SKD-4C



SAIKANG Medical

Mai sănătos
viata ta

GT3k

Caracteristici ȘI RESPECTATURI

Parametrii tehnici

• dimensiune exterioară (lxlxh)	2270x970x500 mm
• Platformă pentru saltea	1925x830 mm
• Sarcina de lucru sigură	250 kg
• Reglarea spătarului	0-75° (±10°)
• Reglarea genunchilor	0-35° (±10°)
• Trendelenburg	0-6°



Configurație tehnică

<input checked="" type="checkbox"/> Manivela manuala	3 buc
<input checked="" type="checkbox"/> Roti laterale duble de 5", inchidere centralizata	4 buc
<input checked="" type="checkbox"/> Pedala de inchidere centralizata	2 buc
<input checked="" type="checkbox"/> Cap și picior ABS din aliaj de aluminiu cu blocare sigură	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> șină laterală pliabilă din aliaj de aluminiu	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> iV Pol	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> iV Pole Prevision	4 buc
<input checked="" type="checkbox"/> Cârlig de drenaj	2 buc
<input checked="" type="checkbox"/> cadru balcanic din aluminiu	1 set



Oteluri | Pictura

Baosteel de la Fortune Global 500. 11 Proces de vopsire epoxidica, testare aSTM anti-bateriale, grosime vopsea 0,12 mm, luminozitate 60°, vopseaua poate rezista la impact de 50 kg.

**Sudare | Șasiu**

Robotică Panasonic asigură o sudură netedă la 360° Baza solidă de pat din placă rotativă ștanțată de 5,0 mm.

**Cadru balcanic**

Cadru Balkan din aluminiu, care poate regla pozițiile longitudinale, laterale și de înălțime în toate direcțiile și poate regla cu precizie cea mai confortabilă postură a pacientului.

**Control manual**

Manivela retractabilă, rămânând intactă de 100.000 de ori
Dispozitiv de protecție extrema, sunete la inclinarea în poziție maximă, Paletă puternică pentru mărirea patului.

**Capacul barei de protecție**

Reduceți impactul coliziunii, sigur și slinky, protejați patul și pacientul în timpul transportului.

**Platformă**

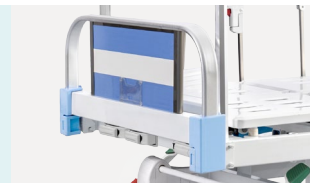
Platformă de formare de ștanțare, suprafață netedă fără cicatrice de sudură, suportând o sarcină de 250 kg. Opțiune platformă translucidă cu raze X din rășină.

**Balustradă**

șină laterală din aliaj de aluminiu, cu 6 trepte, tip pliat cu încuietore sigură.

**Panou pentru cap și picioare**

tub plat din aliaj de aluminiu, placa ignifuga din material MDF. dimensiunea panoului pentru cap și picior poate fi personalizată.

**Rotile**

Rotile cu anvelopa TPR, nu s-au uzat după parcurgerea a 30KM, formare unite fara suruburi.

Treceți testul dinamic: purtând 120 kg, alergați 30 km și treceți obstacolele de 500 de ori.

**Frână**

Sistem de frânare cu trei poziții, transportul poate menține o linie dreaptă.

Capac ABS pe articulația rotilor, previne praful sau părul blocat. ușor de curățat.



Husa anti-alunecare pentru picioare de pat antiderapant, mai stabil în sol.

**Cârlige de drenaj**

Cârlige mobile de drenaj din plastic.

**stâlp IV**

Coloană din oțel inoxidabil cu cârlig din plastic.





proiecta



cercetare



Fabricarea



Întreținere



Serviciu



Statele Unite ale Americii

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180, Orașul
industrii, 91748, California. Tel.: +1
949648 2776

Regatul Unit

Marea Britanie Healthward International
Ltd. Dept. 111, 196 High Road Wood Green,
n22 8HH, Londra.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Rusia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

africa de est

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex unit 3, Mombasa
Road, PO Box 14262-00800, nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Oriental Mijlociu

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 Anglia Cluster, oraș
internațional, Dubai. emiratele
arabe unite.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical equipment Co., Ltd.
COD STOC: 870098

Nr. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+ 86 18021231901 · 24/7

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com



Video companie



Catalog general