



# SK-EM211

pompă de ION



**SAIKANG** Medical

Mai sănătos  
viata ta

# SK-EM211

## Caracteristici și RELEVATE

### parametrii tehnici

- Greutatea produsului greutate brută 3,2 kg greutate netă 2,3 kg
- Selectarea modului modul drop, modul volum, modul timp
- Funcția de bibliotecă de medicamente, vine cu 210 tipuri de medicamente pe care utilizatorii le pot alege.
- funcția istoric poate stoca până la maximum 1500 de înregistrări.
- interval de ajustare a picăturilor de perfuzie  
o picătură/min ~ 400 picături (creșterea pe nivel este de 1 picătură pe minut)
- domeniul de reglare a debitului  
1 ml/h ~ 1200 ml/h (1ml/h~99,9ml/h pe oră, creșterea pe nivel este de 0,1ml/h; mai mult de 99,90,1ml/h pe oră, creșterea pe nivel este de 1ml/h )
- Precizia vitezei  
în ±3% (alegeți un set de perfuzie de înaltă calitate sau un set de perfuzie comun calibrat)
- Precizia mecanică a pompei în ±2%.
- Rata de avansare rapidă 800 ml/h
- Rata KVO  
1ml/h (viteza de infuzie: 1ml/h ~ 300ml/h); 3ml/h (viteza de perfuzie mai mare de 300ml/h).
- intervalul volumului de perfuzie  
1 ml ~ 9999,9 ml (creșterea pe nivel este de 1 ml/h)
- Suma maximă cumulată 9999,9 ml
- interval de timp de perfuzie 1 min ~ 9999,9 min (creșterea pe nivel este de 1 min)
- Blocarea pragului de alarmă:  
Ridicat: 800 mmHg ± 200 mmHg (106kPa ± 26,7kPa)
- Blocarea pragului de alarmă:  
Mijloc: 500mmHg±100mmHg (66.7kPa±13.3kPa)
- Blocarea pragului de alarmă:  
scăzut: 300mmHg±100mmHg (40.7kPa±13.3kPa)
- Temperatura mediului de lucru temperatura: + 5°C~+40°C
- umiditatea relativă 20% ~ 90%
- presiunea atmosferică 860 hPa ~ 1060 hPa

#### Alte caracteristici

- Tehnologia de perfuzie în bolus, este aproape de nevoile clinice și ameliorează disconfortul pacienților.
- tehnologie de detectare a bulelor cu ultrasunete, monitorizează intenționat bulele din tubul de perfuzie.



### Proiecta

Design integrat umanizat, aspect rafinat, are un avantaj evident în salvarea pacienților critici și reducerea volumului de muncă al asistentelor.



### Materialul carcasei

turnare prin injecție de plastic nou de inginerie ABS.



### Design ecran

Ecran de 4,3 inci, rezoluție 272x480 tFt, suport în mai multe limbi, echipat cu iluminare de fundal, potrivit pentru diverse medii, afișați clar toate stările de lucru pe același ecran.



### Structura internă

suportul din aliaj de aluminiu-magneziu este stabil și fiabil, are o rezistență bună la șocuri și este ușor de mutat.



### Mâner

Design mâner fix, confortabil, stabil și ușor de mutat.



### Cuier

suportul cu șurub stabil poate fixa pompa de perfuzie pe perete sau pe stălp.



### Baterie

Încorporat cu o baterie litiu-ion de mare capacitate, asigurând o funcționare continuă de până la cinci ore în cazul întreruperii alimentării cu curent alternativ.



### Linia de perfuzie

Funcția excelentă KVO (Păstrați vasele deschise) menține conducta de perfuzie neobstrucționată.



### Interfață de operare

conținutul afișajului interfeței: timp, capacitatea bateriei, starea perfuziei, modul, rata, volumul perfuziei, cantitatea cumulativă, timpul de perfuzie, nivelul volumului, departamentul și numărul de pat.




### Funcția de control de la distanță

poate controla dispozitivele de la distanță, introduce direct numere pentru a regla parametri precum viteza, timpul de perfuzie și volumul medicamentelor, ceea ce poate economisi timp și efort pentru personalul medical.



### Funcția de alarmă

sistemul de alarmă triplu de sunet, lumină și ecran are o funcție prominentă.

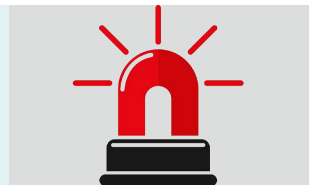



Constant  
Inovație



proiecta



cercetare



fabricatie



întreținere



serviciu



În toată lumea  
SUCURSALE

**Filiala din America de Sud**

**Saikang Medical  
Technology, Inc**  
W3400 Corrientes, argentina  
tEl: +55 (11) 2758-0438 rua  
universal, Hollywood, São  
Bernardo do Campo, Brazilia

tel: +55 (11) 2758-0438

**Filiala Africii de Est**

**Saikang Medical  
Technology Ltd**  
Mezzanine Floor, turn taj, deal  
superior, nairobi, Kenya tEl:  
+254714084806

**Sucursala Asiei de Sud-Est**

**Saikang Medical  
Technology Ltd**  
Sala thammason Subdistrict  
thawi  
districtul Watthana  
Bangkok Thailanda  
tel: +66 642741046

**Filiala din Marea Britanie**

**Uk Healthward  
International Limited**  
DEPT 111,  
196 High road Wood green,  
Londra, n22 8HH  
Regatul Unit  
tel: +31 (0) 202111106

**Filiala rusiei**

**SRL „SAIKANG”**  
454004, Federația Rusă,  
Chelyabinsk,  
universitetskaya  
naberezhnaya, Rusia  
tel: +7 (919)300-00-06

**Sucursala Orientului Mijlociu**

**Saikang Medical Supplies  
(Mid East) LLC**  
Musaffah  
PO Box 53200, abu Dhabi,  
uaE  
tel: +971 585710652

**SAIKANG** / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.  
COD STOC: 870098

📍 Nr. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

📞 + 86 18021231901 · 24/7

✉️ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Video companie



catalogul general